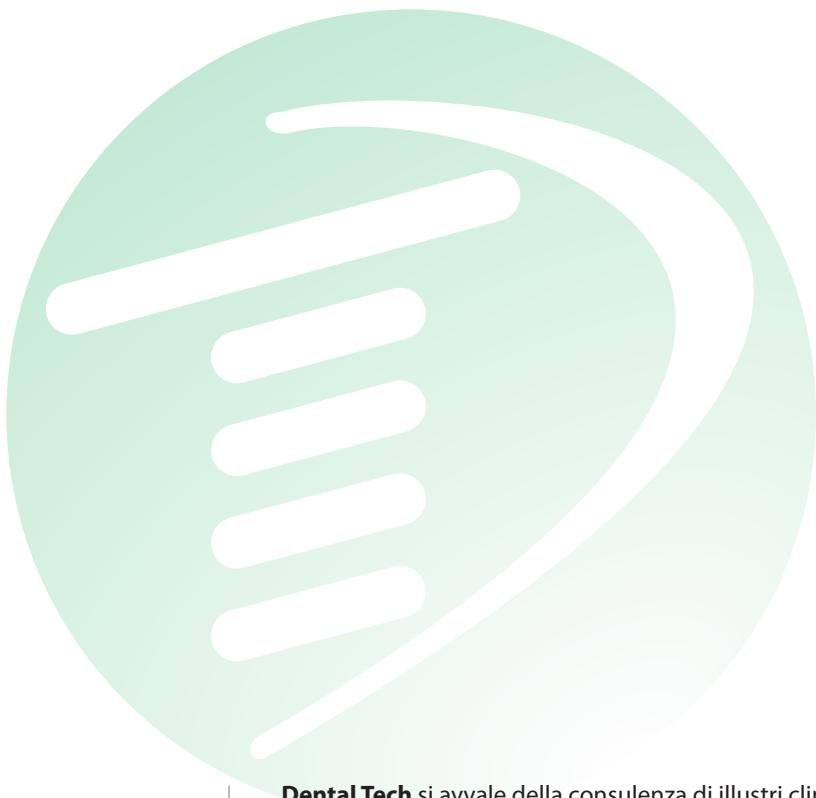




ImpLassic **FT2** System





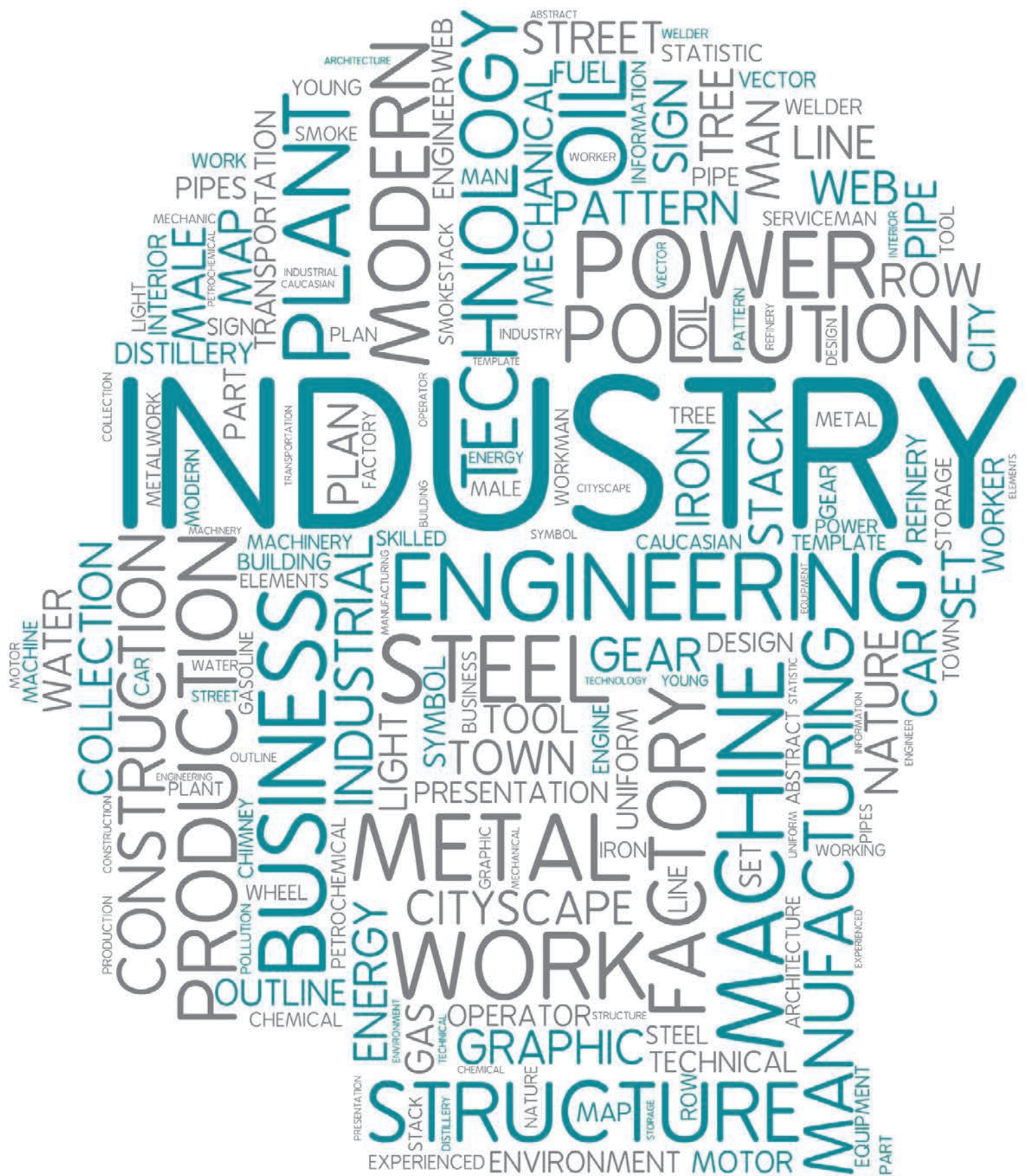
Dental Tech si avvale della consulenza di illustri clinici per recepire le necessità del settore, ed essere costantemente aggiornata sugli sviluppi scientifici nel campo implantologico.

Seguendo i suggerimenti che pervengono dalla realtà clinica, e in stretta collaborazione con centri di ricerca italiani e stranieri, uno staff di tecnici è impegnato a progettare e a sviluppare nuovi prodotti utilizzando materiali innovativi e certificati. Tecnologie all'avanguardia, severi controlli della produzione (100% sulle quote critiche), Checksurface controllo della superficie tramite indagine SEM (microscopio a scansione elettronica) e confezionamenti in ambienti controllati, garantiscono la qualità dei prodotti, da sempre l'obiettivo primario di **Dental Tech**.

Superare gli standard qualitativi richiesti dagli organismi notificati nazionali ed internazionali, è una sfida che l'azienda sostiene quotidianamente, nell'ottica di soddisfare i medici e i loro clienti.

Dental Tech soddisfa le rigorose prescrizioni della Direttiva Europea **93 / 42 / CEE**, certificato da **TÜV Product Service GmbH CE0123**, per prodotti medicali e le norme **UNI EN ISO 9001:2008** **EN ISO 13485:2003/AC:2009** per il sistema qualità.





Contenuti

Questo catalogo contiene componenti
e strumenti per il sistema implantare Dental Tech



| | |
|---|----|
| Significato simboli, legenda materiali e avvertenze | 6 |
| Avvertenze | 7 |
| Informazione prodotto | 8 |
| Come utilizzare gli strumenti | 16 |
| Frese | 17 |
| Drill stop | 18 |
| Strumentario chirurgico | 21 |
| Tray chirurgico | 23 |
| Procedura d' inserimento degli impianti | 27 |
| Packaging | 28 |
| Caratteristiche tecniche ImpLassic FT2 | 42 |
| Misure degli impianti | 44 |
| Misure condizionatori gengivali | 45 |

| | |
|--|----|
| PANORAMICA PRODOTTO 3.25 PROTESICO | 48 |
| PANORAMICA PRODOTTO 3.75 PROTESICO | 50 |

COMPONENTI PROTESICI 3.25

| | |
|--|----|
| Componenti per impronta e modelli | 52 |
| Componenti per protesi cementata | 53 |
| Componenti per protesi avvitata a livello impianto | 54 |
| Componenti per protesi avvitata su pilastro | 55 |
| Componenti per Overdenture | 56 |
| Torque guide raccomandato | 57 |

COMPONENTI PROTESICI 3.75

| | |
|--|----|
| Componenti per impronta e modelli | 58 |
| Componenti per protesi cementata | 59 |
| Componenti per protesi avvitata a livello impianto | 61 |
| Componenti per protesi avvitata su pilastro | 62 |
| Componenti per Overdenture | 64 |
| Torque guide raccomandato | 66 |
| Strumentario protesico | 67 |

| | |
|--|----|
| Bibliografia | 68 |
| Condizioni di vendita | 68 |
| Indice per codice di riferimento | 69 |

Significato simboli



Indicazione lotto



Sterilizzato a raggi gamma



Non sterile



Codice prodotto



Riutilizzabile



Utilizzabile entro



Non riutilizzabile



Attenzione consultare
la documentazione allegata



Contrassegno di conformità alla
Direttiva 93/42/CEE



Identifica l'organismo
notificato

Legenda materiali

Ti₅

Titanio gr. 5

Au

Lega aurea

Peek

Peek

Pom

Poliossimetilene

inox

Acciaio Inox
chirurgico

Pc

Policarbonato

Avvertenze

RESPONSABILITÀ Utilizzare componenti non originali, prodotti da terzi, può compromettere la funzionalità degli impianti e dei loro elementi, pregiudicando il risultato finale e annullando la garanzia del produttore.
L'applicazione del prodotto avviene al di fuori del controllo di **Dental Tech** e sotto la responsabilità dell'utilizzatore finale.
Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti da tale attività.

ISTRUZIONI D'USO Sono da considerare esclusivamente come raccomandazioni. Tali informazioni non sono sufficienti e non esentano l'utilizzatore dall'assicurarsi dell'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto attraverso una formazione continua.

VALIDITÀ Il presente annulla tutte le precedenti versioni. Le immagini, il contenuto e i prodotti illustrati sono passibili di modifica senza preavviso.

REGISTERED®  **DentalTech®** DENTAL IMPLANT SYSTEM ImpLogic® e BWS sono marchi registrati da **Dental Tech** srl.
La riproduzione o pubblicazione è consentita esclusivamente con autorizzazione scritta di **Dental Tech** srl.

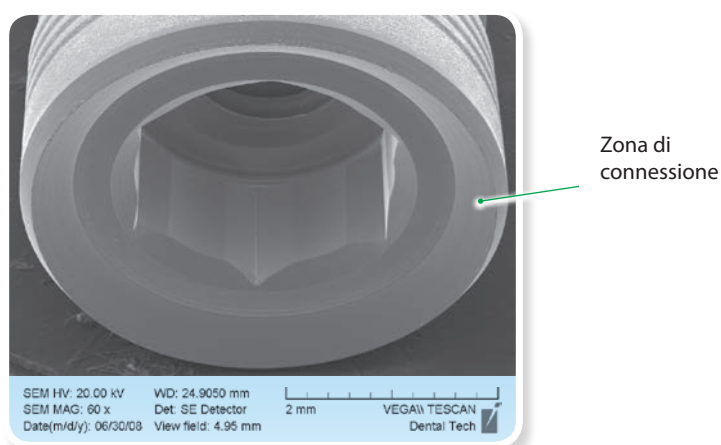
LOCATOR™ Marchio registrato da Zest Anchors LLC.

CONNESSIONI IMPLANTARI IMPLASSIC

Dental Tech mette a disposizione dei clinici e degli odontotecnici due tipologie di connessioni protesiche, una per gli impianti sommersi IMPLASSIC e IMPLOGIC® ed una per gli impianti transmucosi IMPLASSIC TR e TRW, di seguito verranno considerate le caratteristiche e i vantaggi delle due connessioni.

Impianti sommersi

I suddetti impianti hanno un design interno che prevede un bisello a 45° nella porzione più coronale e un esagono nella porzione sottostante.



La zona di connessione caratterizzata dal bisello a 45°, consente di posizionare il pilastro con estrema facilità e sicurezza, orienta la distribuzione del carico evitandone l'accumulo lungo la superficie dell'impianto e permette di realizzare componenti protesiche con lo stop per la vite molto basso, caratteristica che agevola il lavoro del tecnico in fase di rettifica dei pilastri.

L'esagono interno, è profondo circa 2mm e conferisce un'ottima stabilità al pilastro protesico contrasta le forze laterali e salvaguarda la vite di fissaggio da sollecitazioni eccessive.

Riassumendo, possiamo affermare che la connessione esagonale interna degli impianti ImpLassic e ImpLogic® è funzionale ed affidabile in quanto:

- facilitando l'inserimento delle componenti protesiche consente al clinico una maggior sicurezza tattile all'interno del cavo orale;
- permette di realizzare emergenze più naturali, quindi una migliore estetica in virtù del basso profilo dei monconi e delle viti di fissaggio;
- riduce il rischio di svitamenti delle viti di fissaggio in virtù dell'elevata stabilità conferita dall'esagono interno, aumentando così la predicibilità del manufatto protesico.

Precisione della connessione

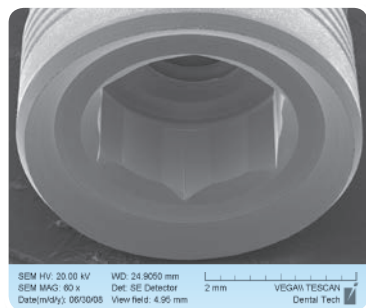
Una delle note caratteristiche di Dental Tech è lo scrupoloso controllo che effettua su tutto ciò che produce, tanto per gli impianti, come per le componenti protesiche vengono controllate tutte le quote critiche al 100%.

La zona di connessione tra impianto e pilastro riveste una fondamentale importanza dal punto di vista biologico, infatti l'ampiezza del gap tra le componenti sopra citate potrebbe essere causa di perdita ossea perimplantare. Ridurre al minimo il gap in questa zona, significa ridurre l'area dell'infiltrato infiammatorio, una delle maggiori cause di riassorbimento osseo perimplantare. Realizzare dispositivi precisi è una delle missioni principali di Dental Tech, per questo, oltre ai controlli di routine, vengono effettuati controlli al SEM per valutare l'ampiezza del gap delle connessioni.


Di seguito viene schematizzato un controllo.

Precisione delle componenti protesiche Dental Tech


CONNESSIONI



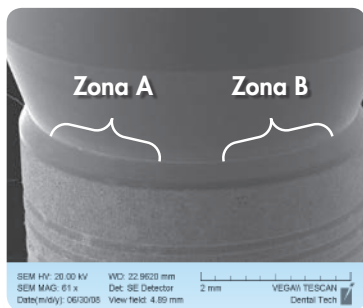
IMPIANTO E PILASTRO ASSEMBLATI MANUALMENTE



GEOMETRIA DELL'IMPIANTO

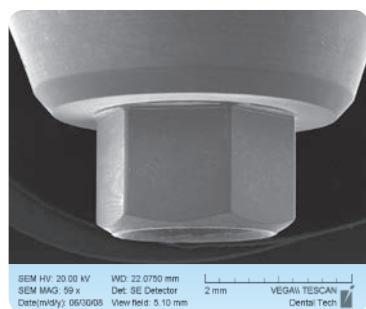


AREE DI VALUTAZIONE DELL'ACCOPIAMENTO

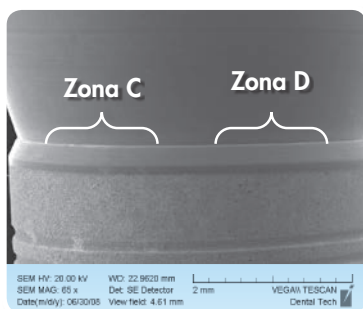


GEOMETRIA DEL PILASTRO

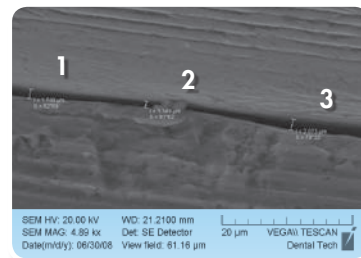ESEMPIO DEL CONTROLLO Misura dei Gap




Zona A

| | |
|---|----------|
| 1 | µm 1.748 |
| 2 | µm 1.149 |
| 3 | µm 2.073 |

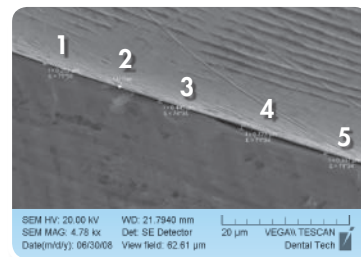


Zona B

| | |
|---|----------|
| 1 | µm 0.252 |
| 2 | µm 0.000 |
| 3 | µm 0.445 |
| 4 | µm 0.773 |
| 5 | µm 0.387 |

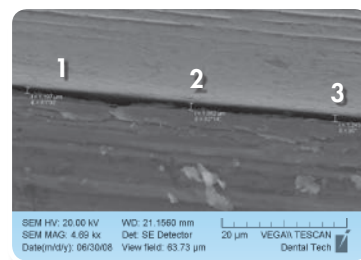

Zona C


| | |
|---|----------|
| 1 | µm 1.197 |
| 2 | µm 1.382 |
| 3 | µm 1.245 |

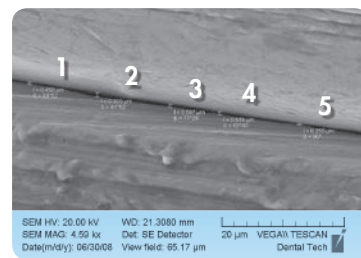

Zona D

| | |
|---|----------|
| 1 | µm 0.450 |
| 2 | µm 0.900 |
| 3 | µm 0.587 |
| 4 | µm 0.576 |
| 5 | µm 0.255 |

| | A | B | C | D |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| misura 1 | 1,748 | 0,252 | 1,197 | 0,45 |
| misura 2 | 1,149 | 0,000 | 1,382 | 0,9 |
| misura 3 | 2,073 | 0,445 | 1,245 | 0,587 |
| misura 4 | | 0,773 | | 0,576 |
| misura 5 | | 0,387 | | 0,255 |

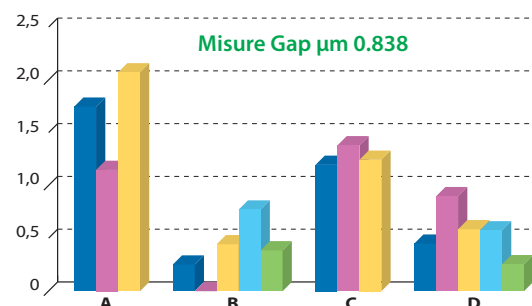


La superficie implantare BWS®, viene realizzata da Dental Tech mediante un processo di sabbiatura con Allumina purissima, i cui eccessi vengono eliminati tramite una fase di mordanatura con acido.

Questo doppio processo consente di ottenere una superficie estremamente pulita con una rugosità ottimale che favorisce l'adesione cellulare.


Caratteristiche della superficie BWS®

Pulizia superficiale

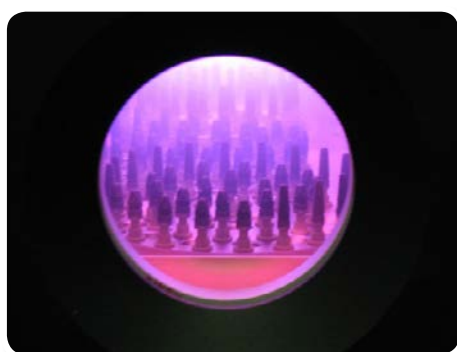
L'estrema pulizia ottenuta da Dental Tech con attenti protocolli e minuziosi controlli, favorisce una intensa attività cellulare sulla superficie degli impianti, che garantisce, assieme alla rugosità, una veloce stabilizzazione del coagulo.




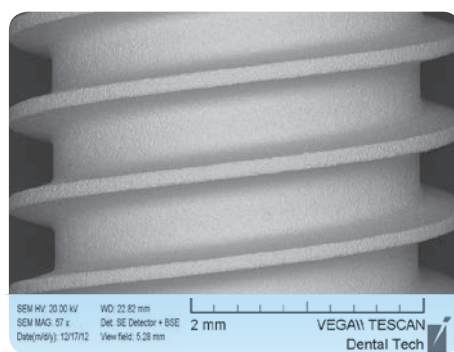
Trattamento finale al Plasma per eliminare il carbonio dalla superficie implantare



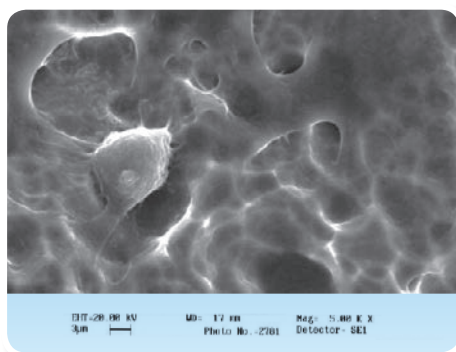Assenza di contaminazione particellare sulla superficie dell'impianto (osservazione al SEM)



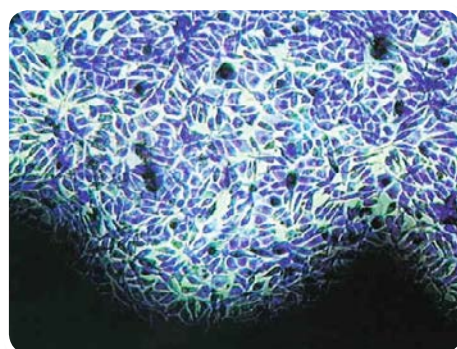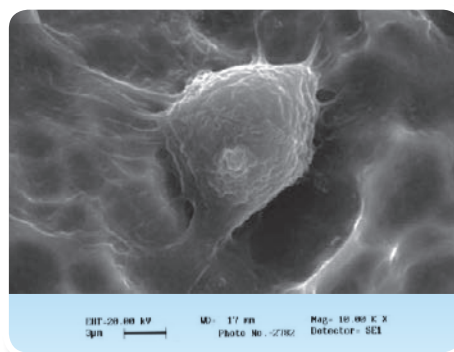
Valutazione dell'attività cellulare (vitalità dei fibroblasti) tramite controllo al SEM. (controllo dopo 6 ore di contatto)




Valutazione dell'attività cellulare (vitalità dei fibroblasti) tramite controllo al microscopio ottico invertito a contrasto di fase.

Rugosità ottimale

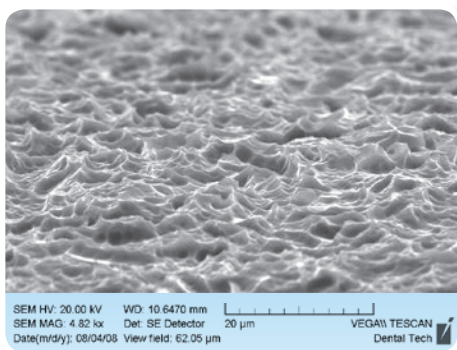
I processi di sabbiatura e mordenatura della superficie implantare, consentono di ottenere valori di rugosità ottimali che rendono più tenace l'adesione della fibrina alla superficie ed agevolano il processo di guarigione ossea riducendone sensibilmente i tempi. La capacità della superficie BWS® di trattenere la fibrina, consente agli osteoblasti di migrare dall'osso alla superficie stessa e ivi riprodursi producendo nuovo osso a diretto contatto del titanio (osteointegrazione a contatto)



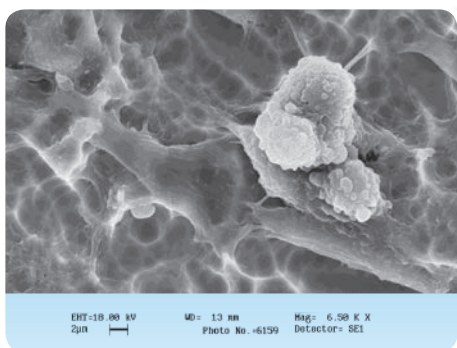Micro morfologia della superficie implantare



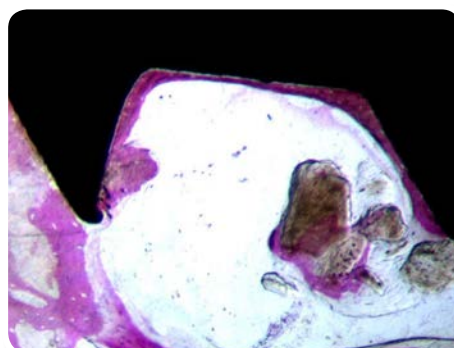
Cellule a diretto contatto della superficie implantare



*Neo formazione ossea a diretto contatto con la superficie implantare**

Studio clinico in vivo

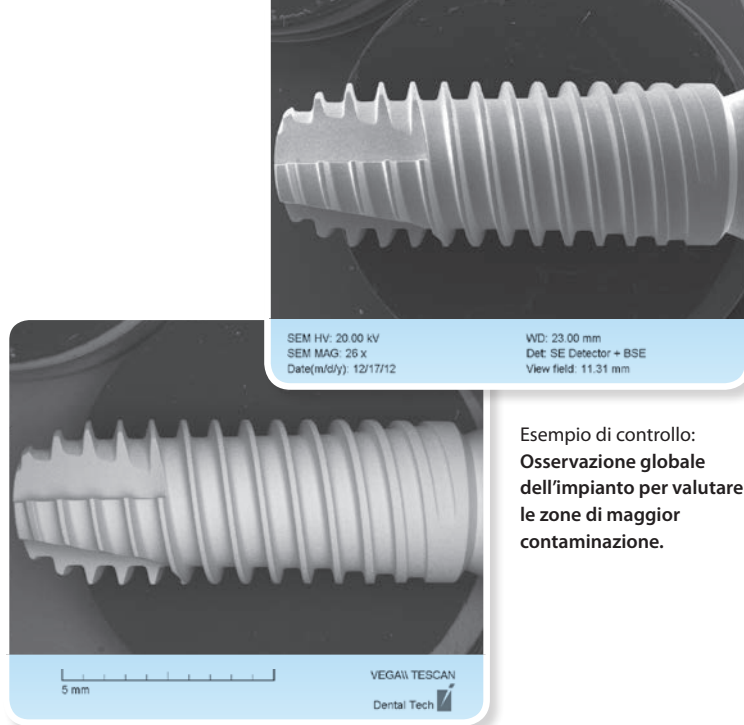Chiara Giamberini; Angelo Tagliabue; Dino Azzalin; Giorgio Santarelli
Dentista Moderno - speciale implantologia - Ottobre 2011




Esempio di controllo:
Osservazione globale dell'impianto per valutare le zone di maggior contaminazione.


Controllo della rugosità e della pulizia superficiale dell'impianto

La procedura sopra citata, prevede il controllo a campione per ogni lotto di produzione di più impianti, gli strumenti utilizzati sono il SEM e la MICROANALISI. Il primo utile ad individuare le contaminazioni presenti sul dispositivo analizzato e la seconda utile a valutarne qualità e quantità.

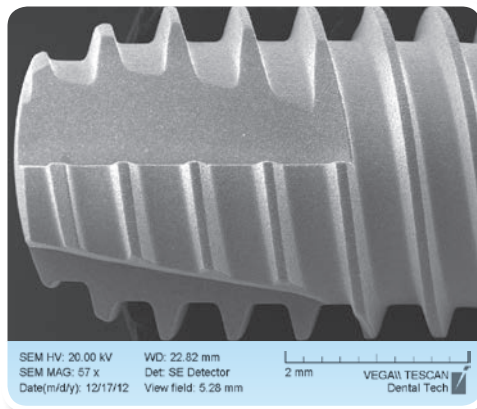
Esempio di controllo:
Osservazione parziale dell'impianto per approfondire la ricerca di aree contaminate.





Apice

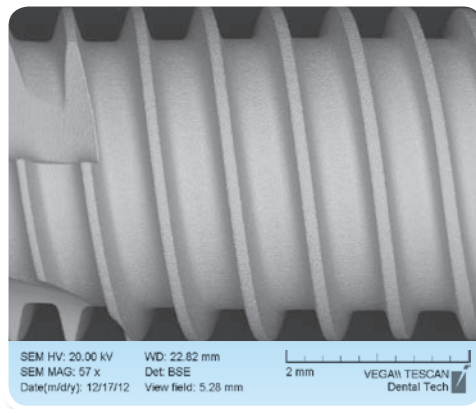

Fusto

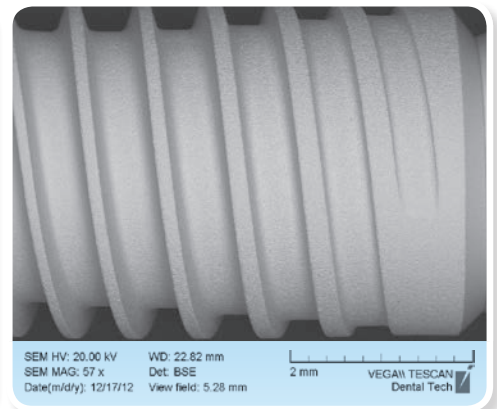


Collo

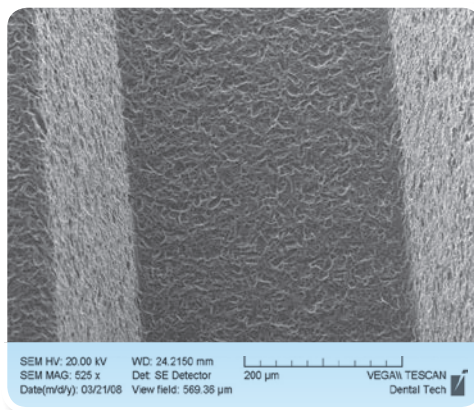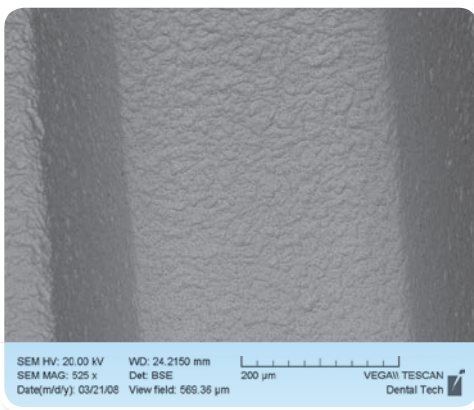


Visione del fondo spira

La visione della superficie in modalità **Back-Scattering** (immagine di destra) consente di escludere la presenza di particelle di carbonio nella zona osservata.

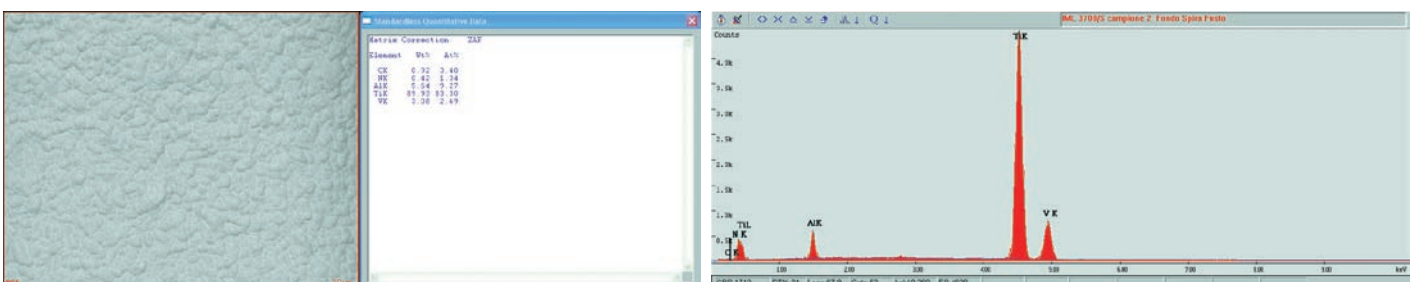
A circa 1000x viene effettuata l'analisi chimica quantitativa e qualitativa della superficie per avere una zona d'analisi significativa.



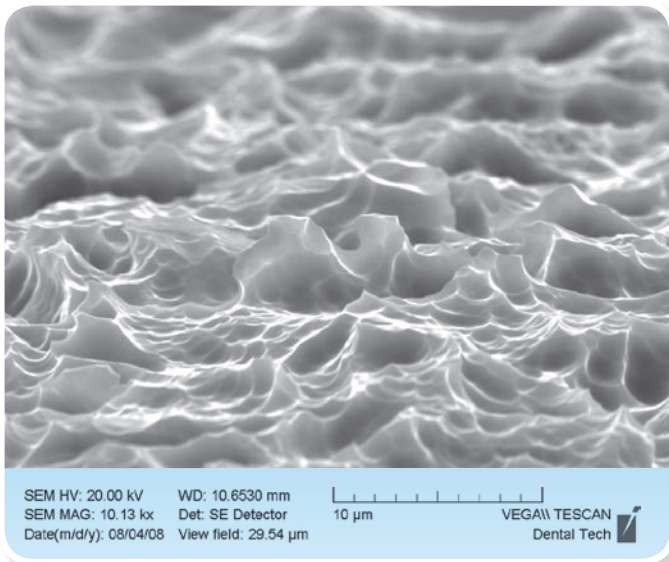
A maggiori ingrandimenti si nota una morfologia estremamente articolata e ricca di asperità che consentono al coagulo di aderire perfettamente alla superficie implantare agevolando la cosiddetta Osteointegrazione a contatto, la foto sotto mostra il grado di adesione cellulare dopo 6 ore di contatto. L'impianto viene controllato nella sua totalità per scongiura-



Superficie 10.130x

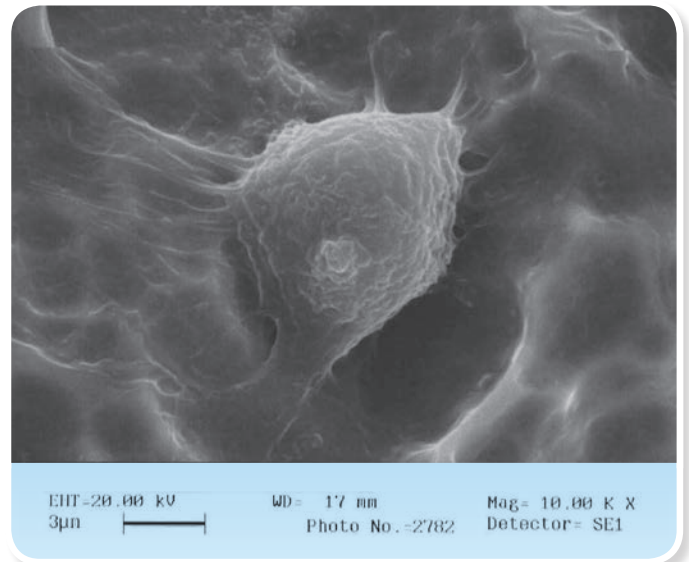

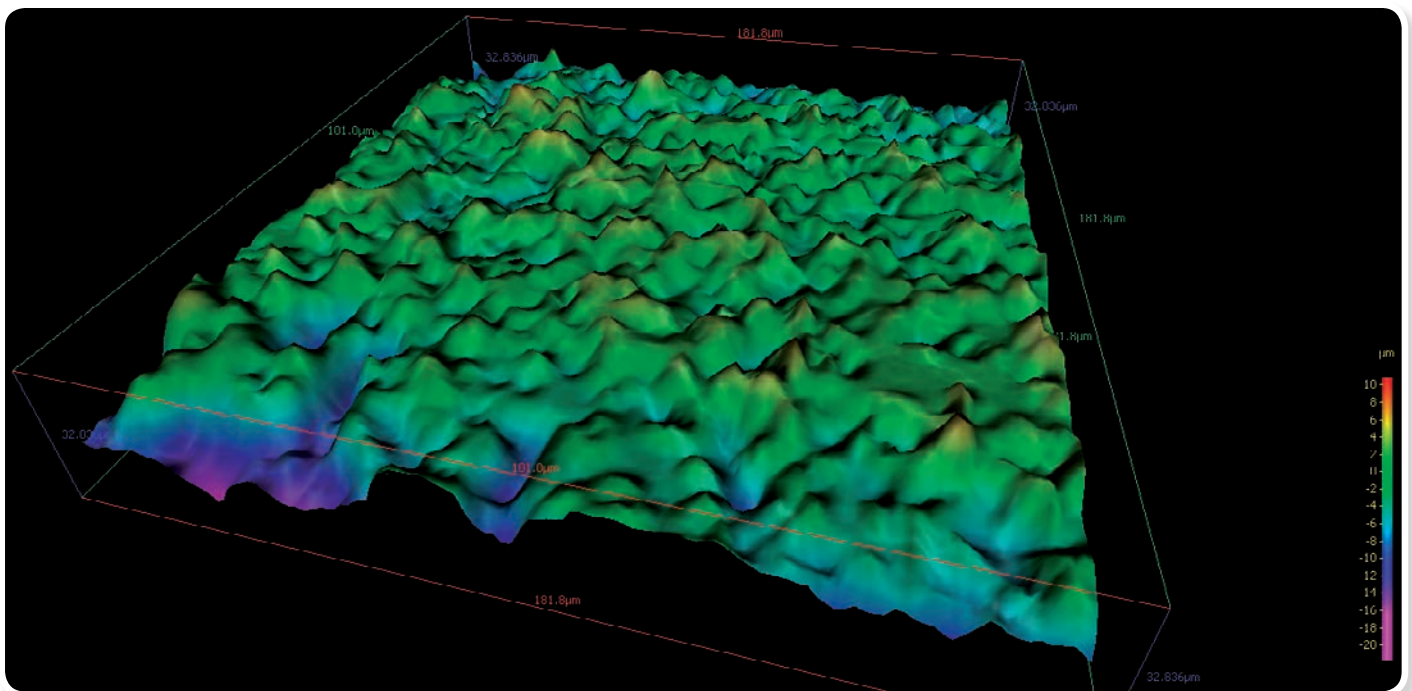re la presenza di contaminazioni. Viene poi eseguita una ricostruzione in 3D della superficie per misurare la rugosità e controllare che si mantenga regolare nel tempo.




Ricostruzione 3D di un'area della superficie implantare.

Bagnabilità

La rugosità associata al trattamento al plasma che riduce sensibilmente la percentuale di carbonio presente, rendono BWS® una superficie a ridotta tensione superficiale.

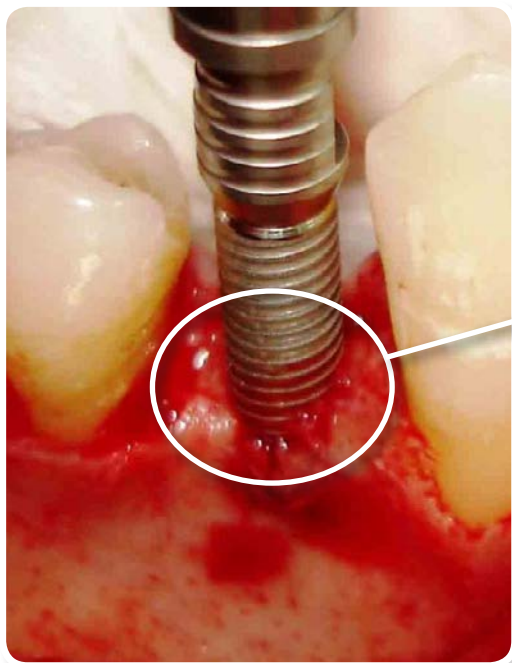Questo consente al sangue di aderire perfettamente alle microstrutture superficiali durante l'inserimento dell'impianto, e agevola la cascata degli eventi che portano alla stabilizzazione del coagulo.



Si noti come il sangue risale spontaneamente le spire dell'impianto durante l'inserimento, questo è dovuto alla ridotta tensione superficiale di BWS®

Caso del dr. Christian Monti

Vantaggi clinici

Grazie alle sue caratteristiche intrinseche, BWS® offre al clinico e ai suoi pazienti diversi vantaggi:

- è possibile caricare precocemente gli impianti (2/3 mesi) riducendo i tempi del trattamento implantoprotesico;
- garanzia di osteointegrazione secondo gli standard internazionali, ne deriva sicurezza e tranquillità operativa;
- possibilità di utilizzo degli impianti in tutte le tipologie di osso.



STRUMENTI PER CHIRURGIA

La strumentazione chirurgica del Sistema Implantare Dental Tech, è semplice ed essenziale e risponde ad ogni richiesta clinica e protocollo di trattamento.

Tutte le frese e i componenti sono contrassegnati con marcatura laser, per consentire la preparazione del sito implantare in

modo corretto alle profondità stabilite, ed un posizionamento dell'impianto prevedibile e sicuro.

Gli strumenti sono disponibili in confezioni singole o in set con diversi tipi di kit chirurgici.

Come utilizzare gli strumenti chirurgici

Per non arrecare danni meccanici e/o termici al tessuto osseo nella zona in cui dovrà essere inserito l'impianto, e ottenere un sito chirurgico congruo (condizione indispensabile per

ottenere una buona osteointegrazione dell'impianto) occorre rispettare alcune regole fondamentali:

- 1 Utilizzare frese con progressione graduale dei diametri, **gli stessi strumenti non dovranno essere utilizzati per più di 25 osteotomie**
- 2 Non superare gli 800 RPM durante l'osteotomia
- 3 Non superare i 20 RPM in caso di maschiatura con contrangolo
- 4 Accertarsi, durante l'osteotomia, che gli strumenti lavorino in asse
- 5 Durante l'osteotomia e la maschiatura non esercitare pressioni laterali

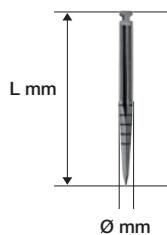
- 6 L'osteotomia deve essere eseguita esercitando leggere pressioni e movimenti di andata e ritorno sull'asse dello strumento
- 7 Utilizzare abbondante irrigazione con soluzione fisiologica, sia durante la fresatura, sia durante la maschiatura del sito chirurgico
- 8 Controllare che durante l'intervento rimangano costantemente liberi i canali di irrigazione degli strumenti che ne sono dotati
- 9 Evitare categoricamente, in fase chirurgica di raffreddare strumenti e sito implantare con le siringhe aria-acqua del riunito

Pulizia e sterilizzazione

- Le frese ed gli stop sono dispositivi riutilizzabili, e devono essere lavati e sterilizzati prima dell'uso. Immediatamente dopo l'utilizzo dei dispositivi, eseguire un'accurata pulizia come indicato:
- Riporre gli strumenti in un recipiente contenente soluzione disinfettante a bassa aggressività, NO IPOCLORITO DI SODIO E STERILIZZANTI A FREDDO (acido peracetico, glutaraldeidi, polifenoli ecc.), per un tempo di circa 15 minuti.
- Sciacquare bene.
- Visionare le frese ed i maschiatori ed accertarsi che non vi siano rimasti residui organici. Strofinare accuratamente le parti esterne con uno spazzolino con setole non metalliche.
- Riporre gli strumenti in una vasca ad ultrasuoni con soluzione detergente, ed eseguire un lavaggio per circa 18 minuti. Quindi sciacquare accuratamente.
- Riporre gli strumenti in una vasca ad ultrasuoni con acqua distillata, ed eseguire un lavaggio per circa 18 minuti. Quindi sciacquare accuratamente.
- Asciugare perfettamente e riporre gli strumenti singolarmente, imbustandoli con materiale adatto alla sterilizzazione a vapore acqueo.
- Sterilizzare in autoclave a vapore acqueo di acqua distillata utilizzando un metodo di sterilizzazione validato e controllato sistematicamente secondo i requisiti della norma ISO 17665-1 "Sterilization of health care products". Un esempio di ciclo può essere la sterilizzazione, mediante autoclave in grado di eliminare le sacche d'aria che si creano all'interno della camera di sterilizzazione, per 20 minuti ad una temperatura di 134°C ed una pressione di 2 Atm.
- **Le frese e gli stop sono realizzati con materiali differenti, devono essere lavati e sterilizzati separatamente.**



Attenzione Le operazioni di pulizia e sterilizzazione, devono essere eseguite da personale qualificato, sotto la diretta responsabilità del medico, attraverso l'utilizzo di macchinari regolarmente tarati ed in perfetto stato.




Fresa lancia

REF 2011.023 CAL
Lunghezza (L) 28 mm Diametro (Ø) 2.0 mm

REF 2011.02 CAXL
Lunghezza (L) 38 mm Diametro (Ø) 2.0 mm



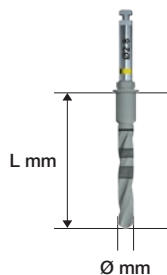inox



Fresa iniziale cilindrica

REF DRP2200
Lunghezza (L) 17 mm Diametro (Ø) 2.0 mm

REF DRP200
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 2.0 mm



Zinconio



inox

Fresa cilindrica **inox**

REF DRP280
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 2.8 mm

REF DRP310
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 3.1 mm

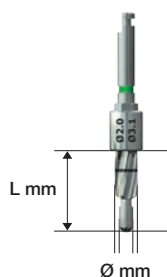
REF DRP325
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 3.25 mm

REF DRP360
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 3.6 mm

REF DRP375
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 3.75 mm

REF DRP410
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 4.1 mm



REF DRP425
Lunghezza (L) 23 mm Diametro (Ø) 4.25 mm



Fresa pilota **inox**

REF PTD310
Lunghezza (L) 11 mm Diametro (Ø) 2.0/3.1 mm

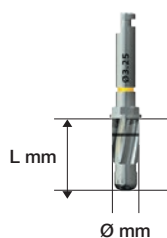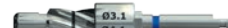REF PTD410
Lunghezza (L) 11 mm Diametro (Ø) 3.1/4.1 mm



Countersink **inox**

REF CTK325
Lunghezza (L) 10 mm Diametro (Ø) 3.25 mm

REF CTK375
Lunghezza (L) 10 mm Diametro (Ø) 3.75 mm

REF CTK425
Lunghezza (L) 10 mm Diametro (Ø) 4.25 mm

REF CTK475
Lunghezza (L) 10 mm Diametro (Ø) 4.75 mm



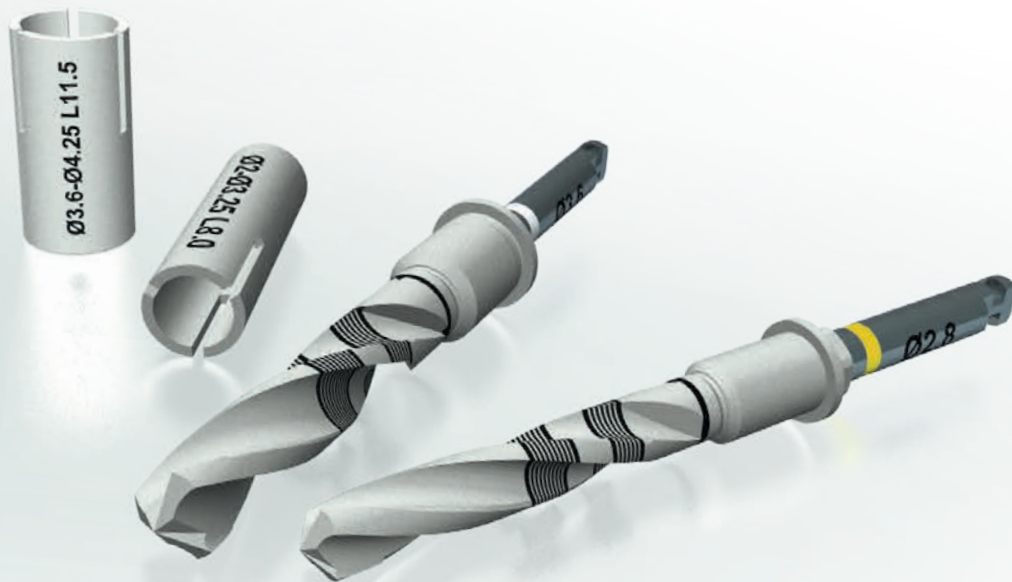
Caratteristiche e vantaggi

Caratteristiche

- Stop di profondità per differenti lunghezze
- Dispositivo Insert-remove

Vantaggi

- Controllo ottimale della profondità durante la preparazione del sito chirurgico anche in condizione di scarsa visibilità del campo operatorio.
Riduzione del rischio chirurgico;
Riduzione dello stress dell'operatore;
Maggiore sicurezza per il paziente
- Facilità di inserimento e rimozione degli stop dalle frese e maggior sicurezza in fase chirurgica per medico e assistente, gli strumenti non vengono mai toccati dagli operatori nelle porzioni taglienti.



PROCEDURA DI INSERIMENTO E RIMOZIONE DELLO STOP

Impugnare il dispositivo Insert-Remove RSC750, con la porzione dedicata al diametro delle frese da utilizzare, rivolta verso l'alto ed inserire nel foro, contraddistinto dalla dicitura (IN), lo stop del diametro desiderato. (Fig. 1 - 2)

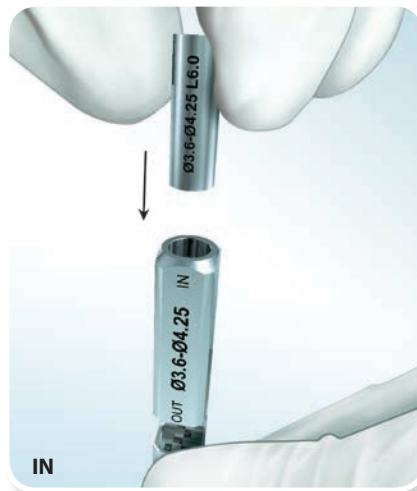


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

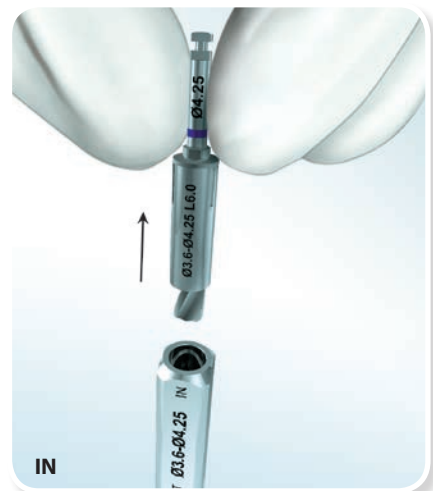


Fig. 5

Impugnare la fresa dalla parte del gambo e spingerla dentro lo stop fino al contatto con la battuta metallica di arresto presente sulla fresa stessa. (Fig. 3 - 4)

Sempre impugnando il gambo della fresa, ritrarre la stessa con lo stop inserito dal dispositivo Insert-remove. (Fig. 5)



Fig. 6



Fig. 7


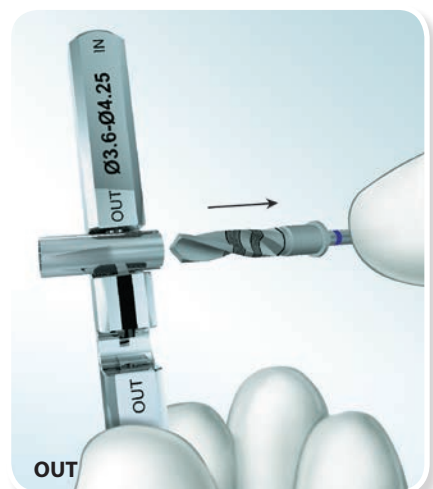


Fig. 8

Impugnare il dispositivo Insert-Remove e il gambo della fresa con lo stop inserito, agganciare lo stop ai denti ritentivi presenti nella scanalatura dell'insert-remove contrassegnata con OUT e tirare verso di sé la fresa. (Fig. 6 - 7)

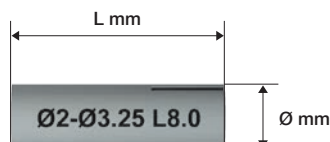Lo stop rimarrà agganciato all'insert-remove e la fresa sarà disponibile per l'utilizzo senza stop o per l'inserimento di uno stop per una differente lunghezza. (Fig. 8)



Stop

Ti₅

Fresa cilindrica

inox

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| | Ø2-Ø3.25 L8.0 |
| Lunghezza (L) 6 mm | REF STC2506 Diametro (Ø) 4.5 mm |
| | Ø2-Ø3.25 L7.0 |
| Lunghezza (L) 7 mm | REF STC2507 Diametro (Ø) 4.5 mm |
| | Ø2-Ø3.25 L8.0 |
| Lunghezza (L) 8 mm | REF STC2508 Diametro (Ø) 4.5 mm |
| | Ø2-Ø3.25 L10 |
| Lunghezza (L) 10 mm | REF STC2510 Diametro (Ø) 4.5 mm |
| | Ø2-Ø3.25 L11.5 |
| Lunghezza (L) 11,5 mm | REF STC2511 Diametro (Ø) 4.5 mm |
| | Ø2-Ø3.25 L13 |
| Lunghezza (L) 13 mm | REF STC2513 Diametro (Ø) 4.5 mm |
| | Ø2-Ø3.25 L16 |
| Lunghezza (L) 16 mm | REF STC2516 Diametro (Ø) 4.5 mm |

| | | |
|------------|---------------------|----------------------|
| REF DRP200 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 2.0 mm |
| REF DRP280 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 2.8 mm |
| REF DRP310 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 3.1 mm |
| REF DRP325 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 3.25 mm |



Insert-Remover

REF RSC750

Ti₅

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| | Ø3.6-Ø4.25 L6.0 |
| Lunghezza (L) 6 mm | REF STC3406 Diametro (Ø) 5.5 mm |
| | Ø3.6-Ø4.25 L7.0 |
| Lunghezza (L) 7 mm | REF STC3407 Diametro (Ø) 5.5 mm |
| | Ø3.6-Ø4.25 L8.0 |
| Lunghezza (L) 8 mm | REF STC3408 Diametro (Ø) 5.5 mm |
| | Ø3.6-Ø4.25 L10 |
| Lunghezza (L) 10 mm | REF STC3410 Diametro (Ø) 5.5 mm |
| | Ø3.6-Ø4.25 L11.5 |
| Lunghezza (L) 11,5 mm | REF STC3411 Diametro (Ø) 5.5 mm |
| | Ø3.6-Ø4.25 L13 |
| Lunghezza (L) 13 mm | REF STC3413 Diametro (Ø) 5.5 mm |
| | Ø3.6-Ø4.25 L16 |
| Lunghezza (L) 16 mm | REF STC3416 Diametro (Ø) 5.5 mm |

| | | |
|------------|---------------------|----------------------|
| REF DRP360 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 3.6 mm |
| REF DRP375 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 3.75 mm |
| REF DRP410 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 4.1 mm |
| REF DRP425 | Lunghezza (L) 23 mm | Diametro (Ø) 4.25 mm |



Cricchetto

inox

Dinamometrico
REF HTW2070/K (20-70 Ncm)



Fisso
REF CTT600



Giravite esagonale

inox

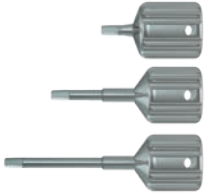
Micro
REF GMX100 Lunghezza (L) 4.5 mm

Extra corto
REF GMM250 Lunghezza (L) 11.5 mm

Lungo
REF 001152 Lunghezza (L) 13.5 mm

Corto
REF GCG0024 Lunghezza (L) 8.3 mm

Lungo
REF GCG0030 Lunghezza (L) 14.3 mm



Giravite esagonale per contrangolo

inox

Extra corto
REF CMX370 Lunghezza (L) 6.5 mm

Corto
REF CMC037 Lunghezza (L) 8.5 mm

Lungo
REF CML037 Lunghezza (L) 14.5 mm



Avvitatore diretto manuale

Ti₅

REF AVD325 Lunghezza (L) 15.7 mm

REF AVD375 Lunghezza (L) 15.7 mm



Avvitatore diretto per contrangolo

Ti₅

REF AVC032 Lunghezza (L) 15.7 mm

REF AVC037 Lunghezza (L) 15.7 mm



Chiave manuale

Ti₅

Corta
REF AMC016 Lunghezza (L) 6.0 mm

Lunga
REF 001162 Lunghezza (L) 8.5 mm



Prolunga

inox

Prolunga corta
REF PMC115 Lunghezza (L) 7.0 mm

Prolunga
REF 110026 Lunghezza (L) 12.5 mm

Per fresa
REF DEX235 Lunghezza (L) 13.5 mm



Parallel pin

Ti₅

REF CPT3747

Chiave forcella

inox


REF CFM001



Sonda di profondità

Ti₅

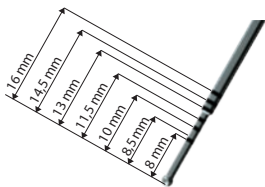REF 001140





DESCRIZIONE

La sua progettazione è stata concepita in collaborazione diretta con gli operatori del settore. Il tray chirurgico, con il suo design ergonomico, realizza il miglior rapporto tra lo strumento chirurgico contenuto e l'ingombro del box. È leggero, maneggevole, sovrapponibile, compatto e capiente.

Facilmente trasportabile, garantisce la sicurezza degli strumenti contenuti, evitando la perdita degli stessi durante la movimentazione. Il tray chirurgico è realizzato con materie plastiche ad alta resistenza agli urti ed adatte alla sterilizzazione in autoclave.

La materia prima è certificata per più di 1000 cicli di sterilizzazione.



base interna antiscivolo



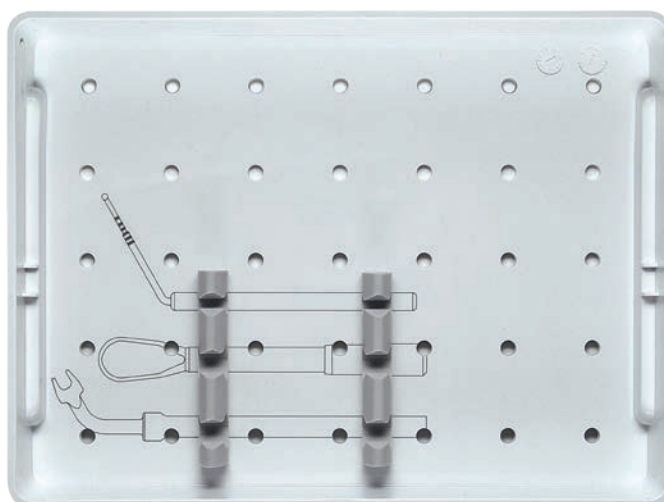
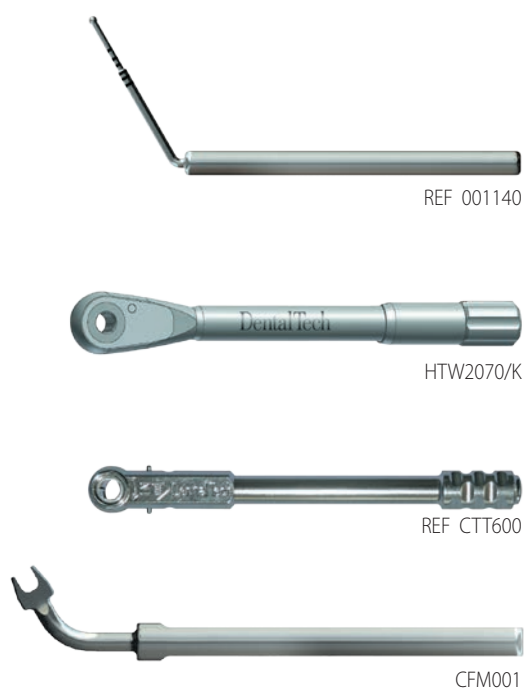
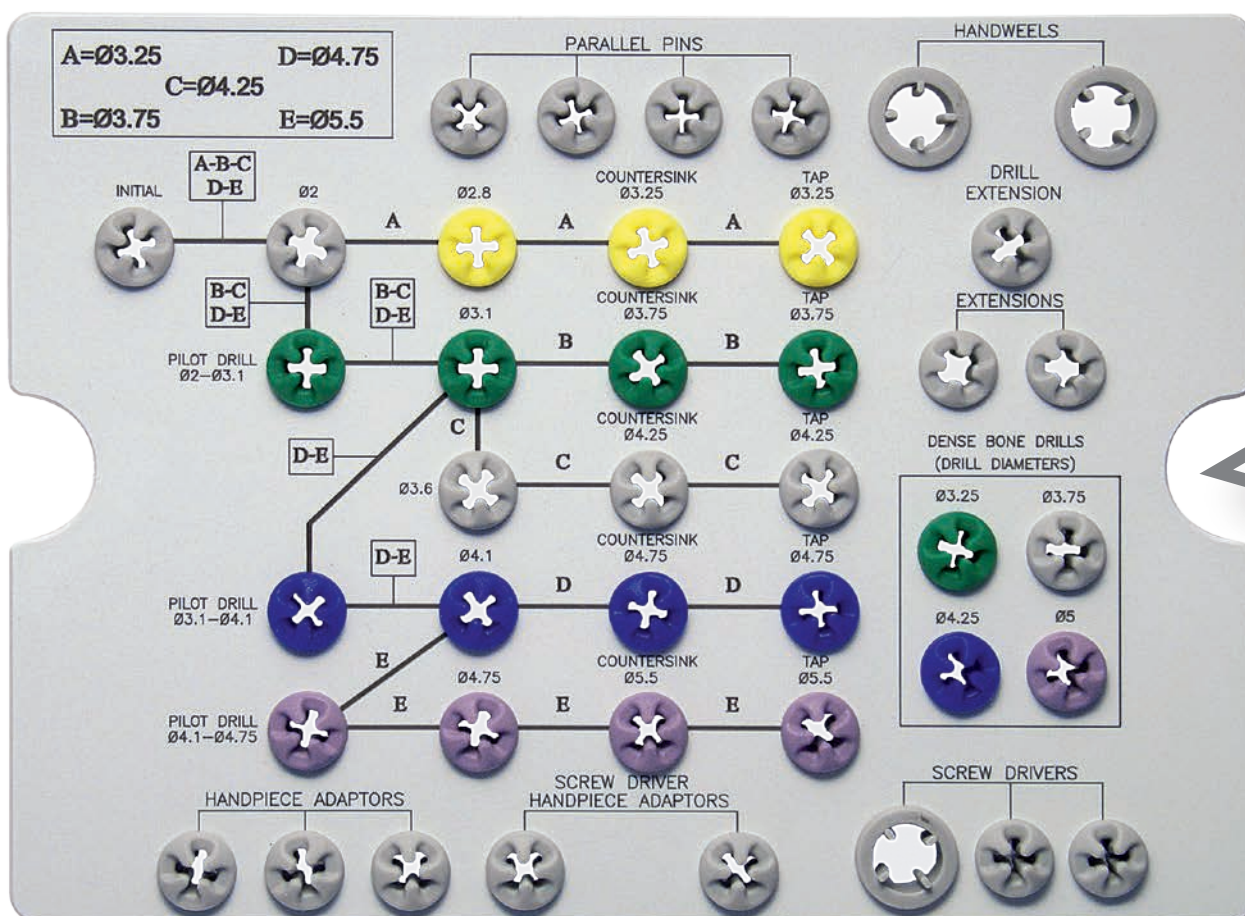
Caratteristiche tecniche

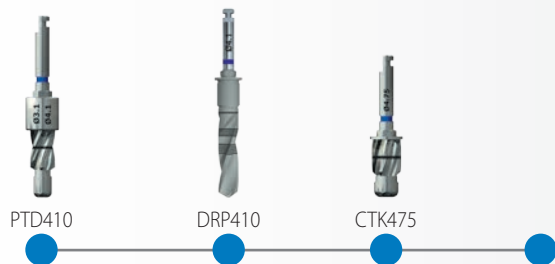
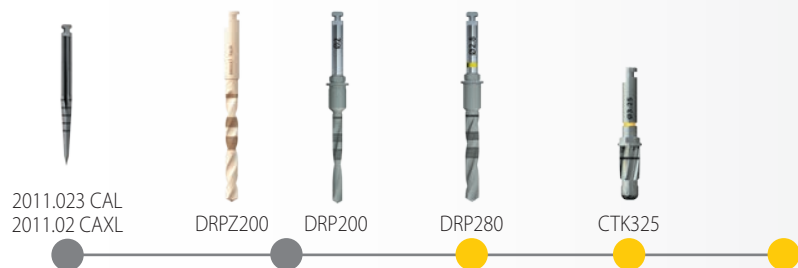
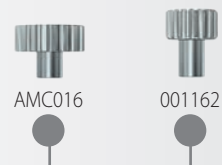
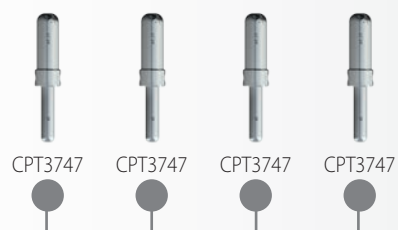
dimensioni di ingombro totali
190x138 h 61,50 mm



REF TRAYCLD


CONTENTUTO DEL TRAY CHIRURGICO





FRESE

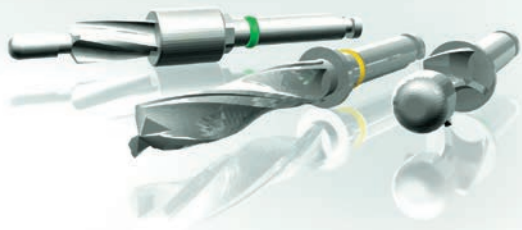
IMPLASSIC FT2 SYSTEM



DESCRIZIONE

Tutte le frese sono contrassegnate con marcatura laser, per permettere la preparazione del sito implantare in modo corretto alle profondità stabilite, ed un posizionamento dell'impianto prevedibile e sicuro.

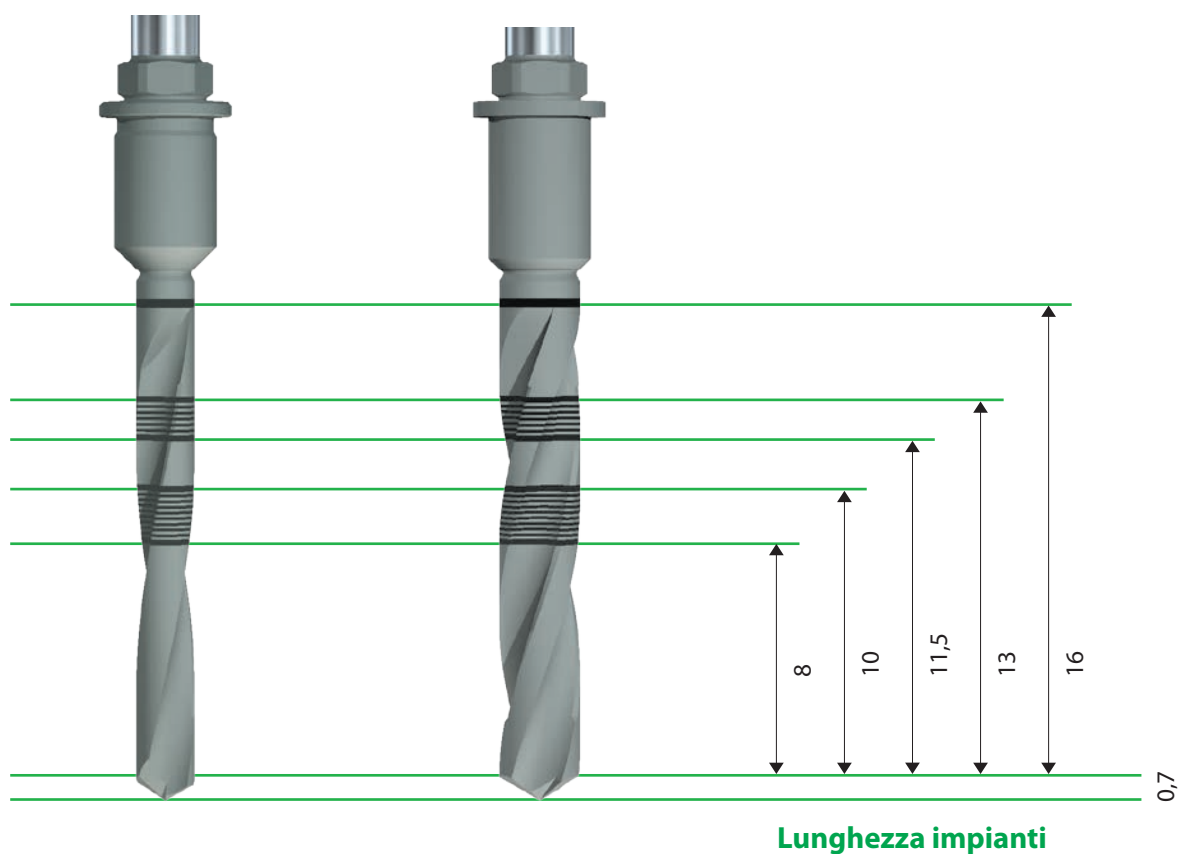Le frese sono dotate di codice colore.



Attenzione

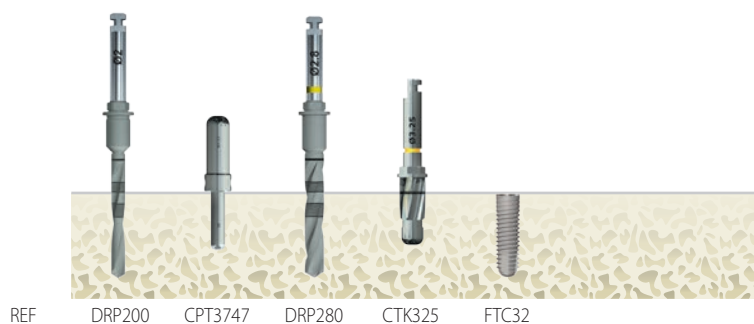
Tutte le frese DRP sono 0,7 mm più lunghe dell'impianto, durante il fresaggio in prossimità di strutture anatomiche vitali, occorre tenere conto di tale maggiore lunghezza

SEQUENZA STRUMENTI PER L'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI IMPLASSIC FT2 SYSTEM



**Sequenza
chirurgica
raccomandata**
Ø 3.25

Ti₅



REF

DRP200

CPT3747

DRP280


CTK325

FTC32



**Sequenza
chirurgica
raccomandata**
Ø 3.75

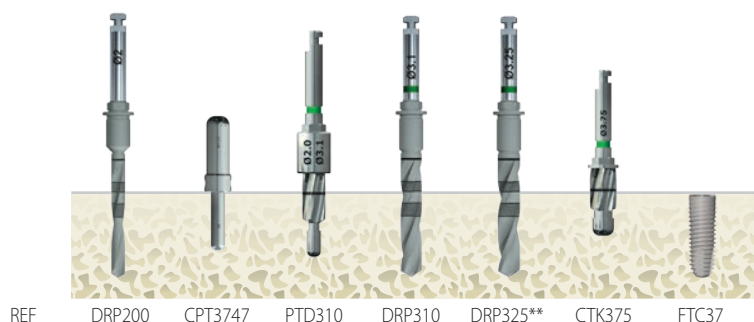Ti₅



REF

DRP200

CPT3747

PTD310

DRP310

DRP325**


CTK375

FTC37



**Sequenza
chirurgica
raccomandata**
Ø 4.25

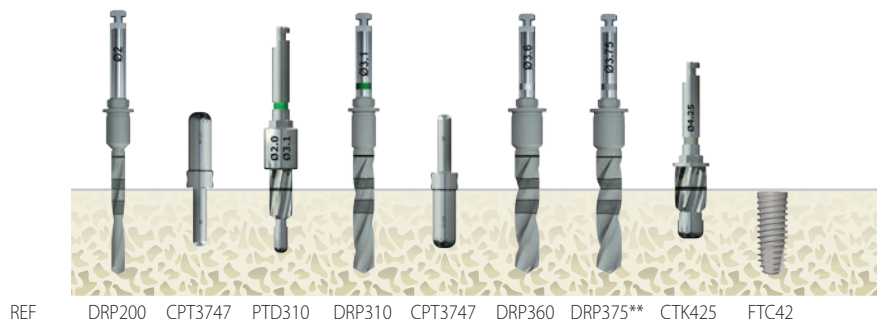Ti₅



REF

DRP200

CPT3747

PTD310

DRP310

CPT3747

DRP360

DRP375**


CTK425

FTC42



**Sequenza
chirurgica
raccomandata**
Ø 4.75

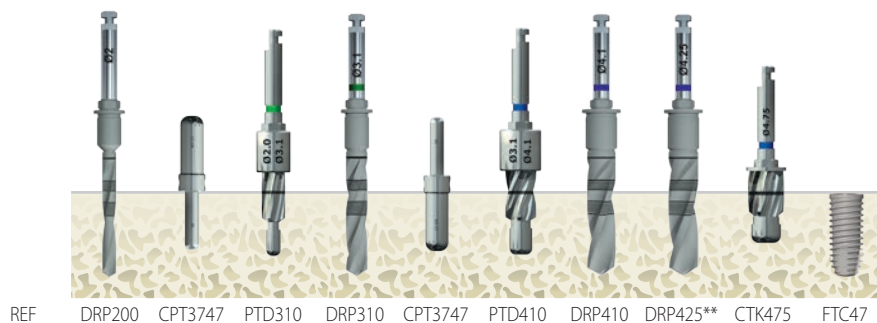Ti₅



REF

DRP200

CPT3747

PTD310

DRP310

CPT3747

PTD410

DRP410

DRP425**

CTK475

FTC47

** Fresa per osso compatto

PACKAGING

Gli impianti endossei Dental Tech vengono forniti in confezione sterile che garantisce, se integra, la protezione dell'impianto da agenti esterni e, se correttamente conservata, la sterilità dello stesso.

La confezione è composta da un **involucro esterno o scatola di cartone** (Fig.10) che contiene, il foglio di istruzioni, gli stickers adesivi con i dati dell'impianto, da applicare alla cartella del paziente, e la scheda informativa per il paziente (passaporto implantare).

Nella scatola di cartone, oltre a quanto sopra descritto, è contenuto un **blister in plastica** (confezione secondaria) (Fig.11) etichettato e sigillato, dentro il quale è contenuta l'**ampolla di plastica** (confezione primaria) che a sua volta contiene l'impianto.

Questa tipologia di confezionamento garantisce una doppia sterilità al dispositivo e una maggior sicurezza per il mantenimento della stessa.

Dental Tech, mette a disposizione della clientela, due tipologie di confezionamento primario (ampolla in plastica), lo Smart Primary Packaging e lo Standard Primary Packaging, di seguito ne vengono analizzate le composizioni.



Fig. 10



Fig. 11

Smart Primary Packaging

È il top di gamma di Dental Tech, ed è composto da un'ampolla di plastica trasparente, da un tappo di plastica colorata (codice colore diametro impianto) che sigilla l'ampolla e contiene la vite di copertura e da un supporto di titanio che sorregge l'impianto. (Fig. 12)

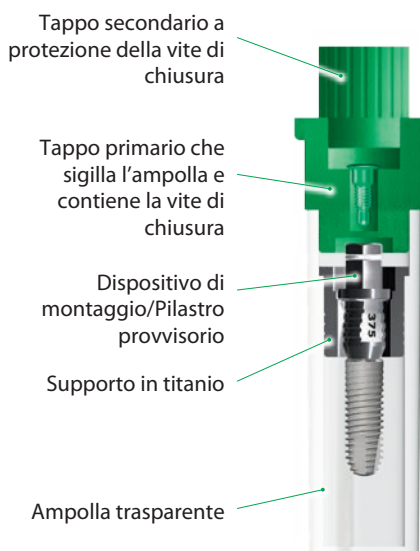


Fig. 12

Standard Primary Packaging

È il prodotto Entry Level di Dental Tech, ed è composto da un'ampolla di plastica trasparente, da un tappo di plastica colorata (codice colore diametro impianto) che sigilla l'ampolla, che contiene la vite di copertura e sorregge l'impianto. (Fig. 13)

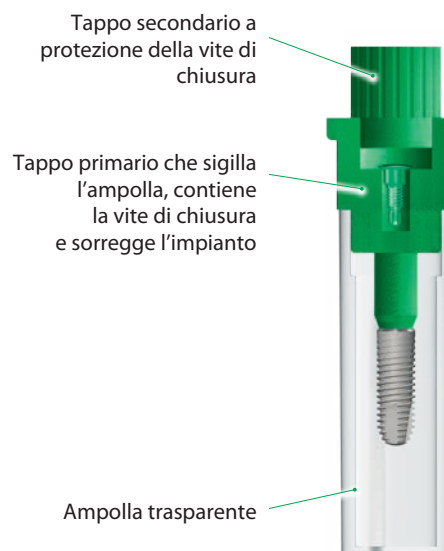


Fig. 13

PROCEDURA D'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

Apertura del blister

(fase comune ai confezionamenti smart e standard)



Dopo avere terminato la preparazione dell'osteotomia, aprire con guanti sterili il blister che contiene l'ampolla di plastica che, a sua volta, contiene l'impianto, facendo attenzione ad evitarne qualsiasi contatto con oggetti non sterili. Depositare l'ampolla su un telo sterile.



Prelevare l'ampolla dal telo sterile tenendo verso l'alto la parte con i tappi colorati.

Di seguito vengono descritte le procedure di inserimento degli impianti secondo il tipo di confezionamento utilizzato.

Smart Primary Packaging

PROCEDURA DI INSERIMENTO CON UTILIZZO DEL CONTRANGOLO

Apertura dell'ampolla



Togliere il tappo primario esercitando una trazione e contestualmente una torsione dello stesso.

PROCEDURA D'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI



Agganciare l'avvitatore da contrangolo CMX370 - CMC037 - CML037 sul contrangolo, col quale si potrà prelevare l'impianto, collegato al mount, dall'ampolla.

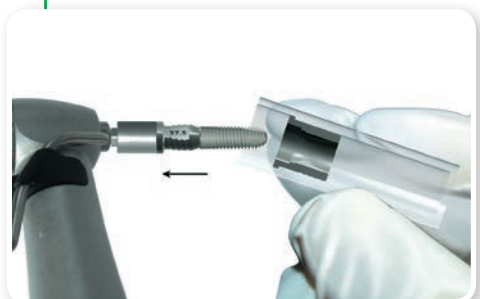


Prelievo dell'impianto


Il dispositivo di montaggio dell'impianto è dotato di un O-Ring di silicone che garantisce la tenuta tra lo stesso dispositivo di montaggio e l'avvitatore da contrangolo.



L'O-Ring di cui è dotato il dispositivo di montaggio consente di trasportare l'impianto dall'ampolla al cavo orale con estrema sicurezza, si consiglia comunque di ruotare verso l'alto l'apice dell'impianto così da ridurne ulteriormente il rischio di caduta accidentale.



Inserimento dell'impianto

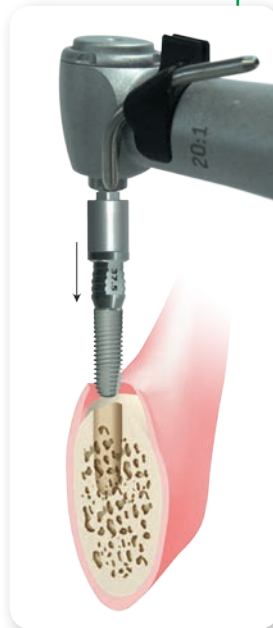

Iniziare l'inserimento dell'impianto nell'alveolo chirurgico dopo avere impostato l'unità chirurgica con i seguenti parametri:

1) Procedura bifasica (sommersa)
RPM 15-20

Torque max. 35-40 Ncm

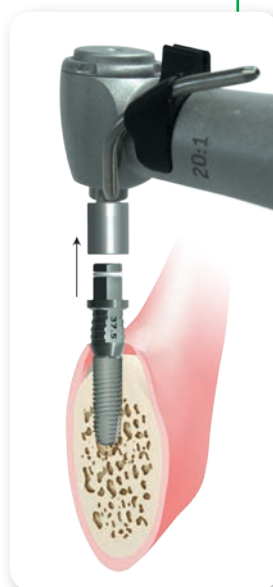
2) Procedura monobasica
realizzata con impianti
Sommersi e viti di guarigione,
con carico dilazionato
RPM 15-20

Torque max. 40-45 Ncm

3) Procedura monofasica con
carico/protesizzazione
immediata
RPM 15-20

Torque incrementale da
20 a 70 Ncm.


Se disponibile un'unità chirurgica con un buon controllo del torque, sia in qualità sia in quantità, è possibile terminare l'inserimento dell'impianto con il contrangolo, in caso contrario inserire il dispositivo nell'alveolo chirurgico sino a quando la potenza della macchina lo consente e terminare l'inserimento manualmente procedendo come segue.



Disinserire l'avvitatore da contrangolo dal mount esercitando una leggera trazione verso l'alto e continuare la messa a dimora dell'impianto con strumenti manuali.

PROCEDURA D'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

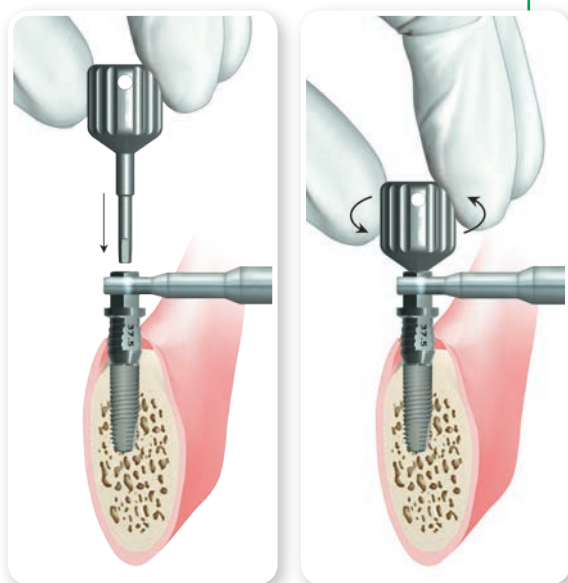Ultimare l'inserimento dell'impianto con lo strumento manuale (cricchetto) REF. CTT600 o con la chiave dinamometrica REF. HTW2070/K, talvolta sarà necessario utilizzare le prolunghe, corta REF. PMC115 e lunga REF. 110026 da collegare agli strumenti sopra citati. Assicurarsi che gli strumenti vengano inseriti nella posizione adatta all'avvitamento (Freccia + IN) ed avvitare sino a quando l'impianto raggiunge la posizione desiderata.



Togliere il dispositivo di montaggio dall'impianto utilizzando la chiave a forcilla REF. CFM001, ed il giravite esagonale extra corto REF. GMM250 e/o giravite esagonale lungo REF. 001152.

Per ultimare la procedura vedere a pag. 40

Smart Primary Packaging

PROCEDURA DI INSERIMENTO MANUALE

Apertura dell'ampolla



Togliere il tappo primario esercitando una trazione e contestualmente una torsione dello stesso.

Prelievo dell'impianto



Il dispositivo di montaggio dell'impianto è dotato di un O-Ring di silicone che garantisce la tenuta tra lo stesso dispositivo di montaggio e la chiave manuale.



L'O-Ring di cui è dotato il dispositivo di montaggio consente di trasportare l'impianto dall'ampolla al cavo orale con estrema sicurezza, si consiglia comunque di ruotare verso l'alto l'apice dell'impianto così da ridurre ulteriormente il rischio di caduta accidentale.



PROCEDURA D'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

Inserimento dell'impianto

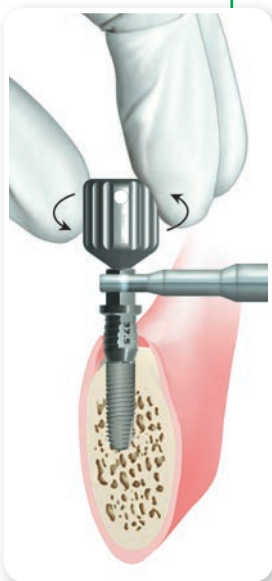
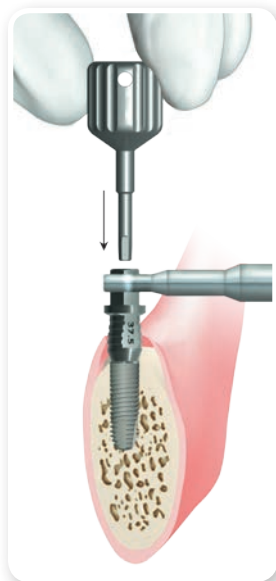
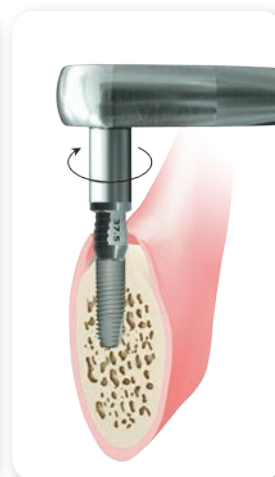
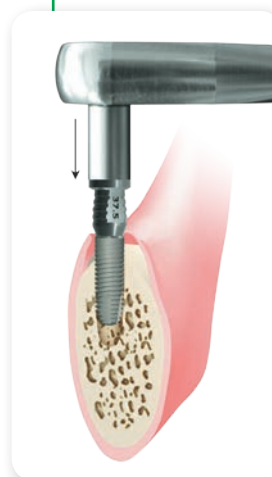


Iniziare l'inserimento dell'impianto nell'alveolo chirurgico servendosi della chiave Manuale, che può essere, corta REF. AMC016 e lunga REF. 001162.

Talvolta sarà necessario utilizzare le prolunghe, corta REF. PMC115 e lunga REF. 110026. nel caso in cui la densità dell'osso lo consenta è possibile ultimare l'inserimento dell'impianto con le chiavi manuali, in caso contrario, procedere come segue.

Ultimare l'inserimento dell'impianto con il cricchetto REF. CTT600 o con la chiave dinamometrica REF. HTW2070/K, talvolta sarà necessario utilizzare le prolunghe, corta REF. PMC115 e lunga REF. 110026 da collegare agli strumenti sopra citati.

Assicurarsi che gli strumenti vengano inseriti nella posizione adatta all'avvitamento (Freccia + IN) ed avvitare sino a quando l'impianto raggiunge la posizione desiderata.




Togliere il dispositivo di montaggio dall'impianto utilizzando la chiave a forcina REF. CFM001, ed il giravite esagonale extra corto REF. GMM250 e/o giravite esagonale lungo REF. 001152.

Per ultimare la procedura vedere a pag. 40

Standard Primary Packaging


PROCEDURA DI INSERIMENTO CON UTILIZZO DEL CONTRANGOLO

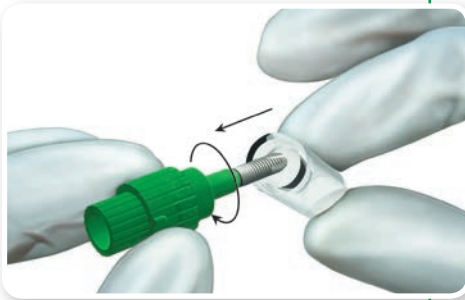Apertura dell'ampolla e prelievo dell'impianto




Aprire l'ampolla di plastica esercitando una trazione e contestualmente una rotazione del tappo primario al quale è collegato l'impianto.

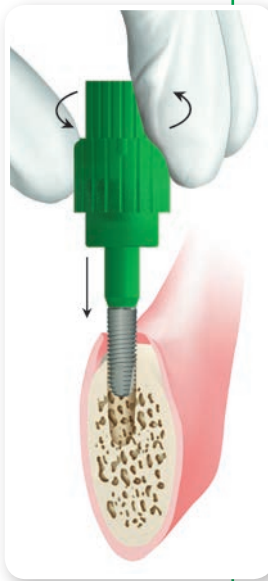
Inserimento dell'impianto



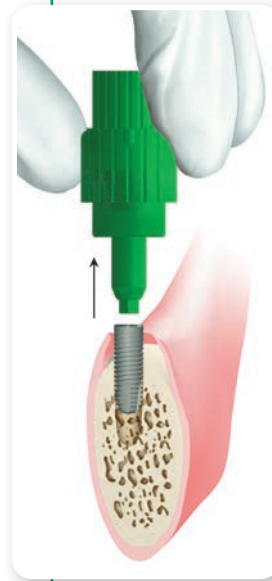Iniziare l'inserimento dell'impianto nell'alveolo chirurgico servendosi del tappo a cui è collegato. Avvitare il dispositivo nell'osso fino a quando la resistenza del supporto di plastica lo consente, estrarre il supporto dall'impianto e comportarsi come segue.



PROCEDURA D'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

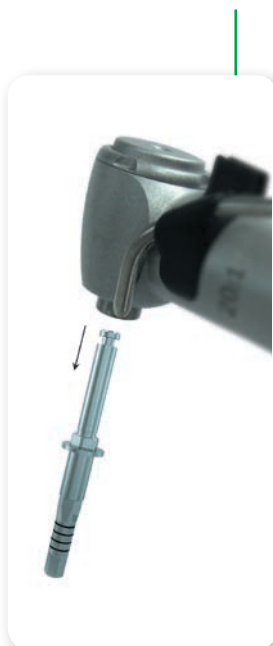

Agganciare il dispositivo AVC al contrangolo con il quale si potrà continuare l'inserimento dell'impianto nell'alveolo chirurgico.



Continuare l'inserimento dell'impianto nell'alveolo chirurgico dopo avere impostato l'unità chirurgica con i seguenti parametri:

- 1) Procedura bifasica (sommersa)
RPM 15-20

Torque max. 35-40 Ncm

- 2) Procedura monobasica realizzata con impianti Sommersi e viti di guarigione, con carico dilazionato
RPM 15-20

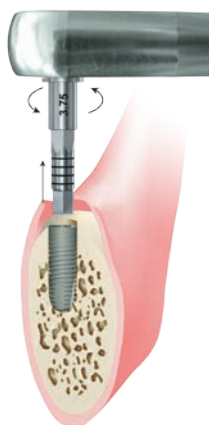
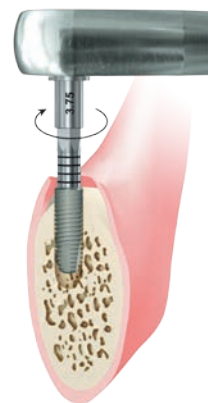
Torque max. 40-45 Ncm

- 3) Procedura monofasica con carico/protesizzazione immediata
RPM 15-20

Torque incrementale da 20 a 70 Ncm.

Se disponibile un'unità chirurgica con un buon controllo del torque, sia in qualità sia in quantità, è possibile terminare l'inserimento dell'impianto con il contrangolo, in caso contrario inserire il dispositivo nell'alveolo chirurgico sino a quando la potenza della macchina lo consente e terminare l'inserimento manualmente procedendo come segue.

Ultimare l'inserimento dell'impianto con il cricchetto REF. CTT600 o con la chiave dinamometrica REF. HTW2070/K a cui verrà collegato lo strumento AVD. Assicurarsi che lo strumento venga inserito nella posizione adatta all'avvitamento (Freccia + IN) ed avvitare sino a quando l'impianto raggiunge la posizione desiderata.




Dopo aver ultimato l'inserimento dell'impianto, togliere il dispositivo di montaggio ruotandolo prima, leggermente in senso anti-orario ed esercitando, poi, una lieve trazione verso l'alto.

Per ultimare la procedura vedere a pag. 40


Standard Primary Packaging PROCEDURA DI INSERIMENTO MANUALE

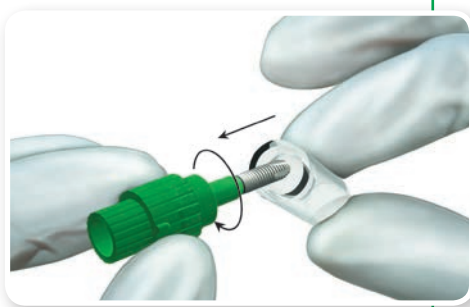Apertura dell'ampolla e prelievo dell'impianto





Aprire l'ampolla di plastica esercitando una trazione e contestualmente una rotazione del tappo primario al quale è collegato l'impianto.

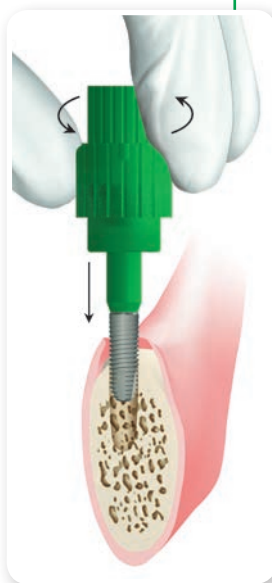Inserimento dell'impianto




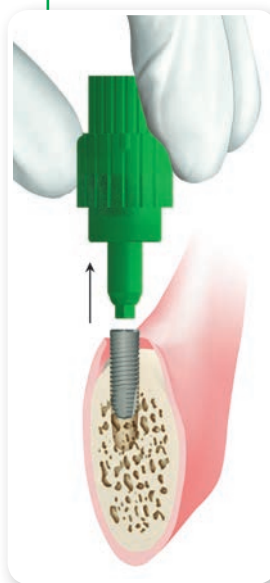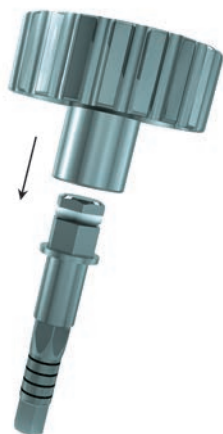Iniziare l'inserimento dell'impianto nell'alveolo chirurgico servendosi del tappo a cui è collegato. Avvitare il dispositivo nell'osso fino a quando la resistenza del supporto di plastica lo consente, estrarre il supporto dall'impianto e comportarsi come segue.






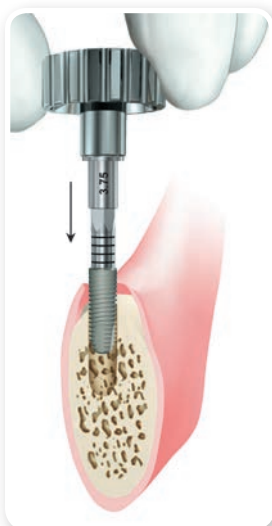
Agganciare il dispositivo AVD alla chiave Manuale corta REF. AMC016 e lunga REF. 001162 e continuare l'inserimento dell'impianto nell'alveolo chirurgico.



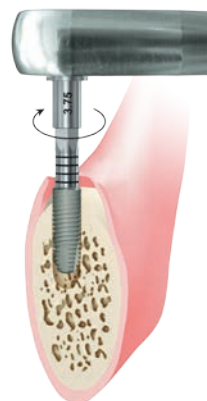Avvitare l'impianto manualmente nel sito chirurgico fino a quando la densità dell'osso consente, terminare l'alloggiamento del dispositivo utilizzando il dispositivo AVD collegato al cricchetto REF. CTT 600 o alla chiave dinamometrica REF. HTW 2070/K.



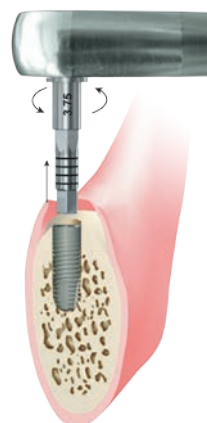
Dopo aver ultimato l'inserimento dell'impianto, togliere il dispositivo di montaggio ruotandoli prima, leggermente in senso anti-orario ed esercitando, poi, una lieve trazione verso l'alto.




Per ultimare la procedura vedere a pag. 40

PROCEDURA D'INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI

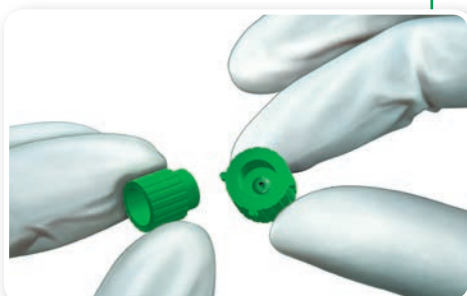
Alloggiamento della vite di chiusura



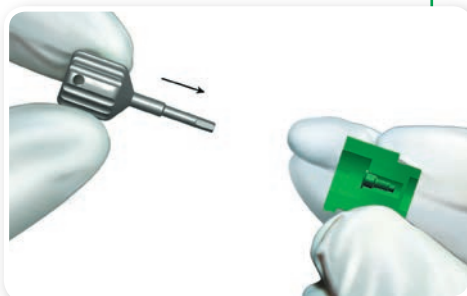Dopo aver concluso il posizionamento del dispositivo, prelevare (**Smart Primary Packaging**) / prelevare svitando (**Standard Primary Packaging**) la vite di chiusura collocata all'interno del tappo (come da illustrazione), servendosi dei giraviti esagonali o del contrangolo con il raccordo REF. GCG0024 / GCG0030.



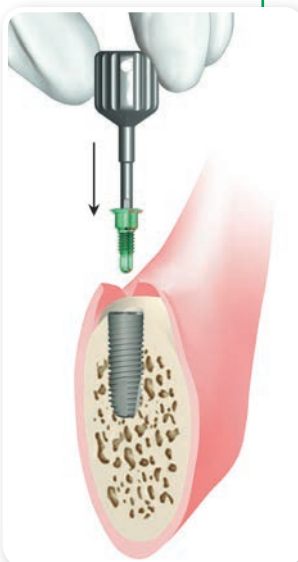
Applicare la vite di chiusura manualmente utilizzando i giraviti esagonali.



Alloggiare la vite manualmente fino a totale chiusura dell'impianto.



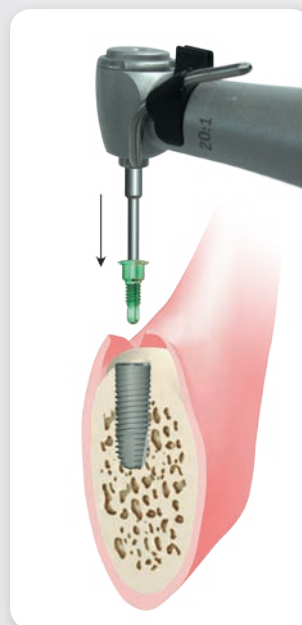
Sutare i lembi a totale chiusura dell'impianto.



In caso di utilizzo del contrangolo, portare la vite in posizione a motore spento, iniziare l'avvitamento solo dopo avere collocato la vite all'interno dell'impianto.



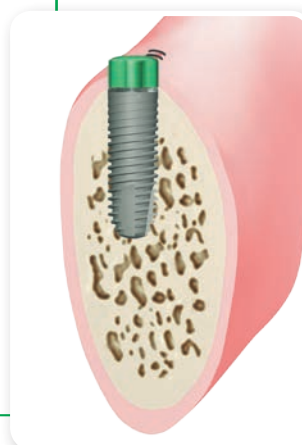Attenzione
Per il serraggio della vite utilizzare 10 Ncm




In caso di guarigione a una sola fase chirurgica, alloggiare un condizionatore gengivale in sostituzione della vite di chiusura e suturare i lembi intorno ad esso.



Attenzione
Serrare max. 15 Ncm


Seconda fase chirurgica (solo per impianti sommersi)

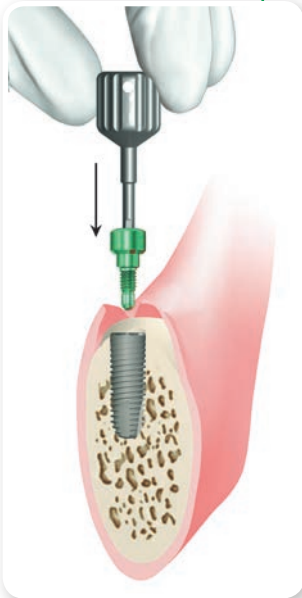Scopertura degli impianti ed inserimento dei condizionatori gengivali




Dopo avere atteso il periodo stabilito per la guarigione / osteointegrazione, procedere alla scoperta degli impianti incidendo un lembo a mezzo spessore o un opercolo, per accedere alla vite di copertura. Rimuovere la stessa servendosi dei giraviti, extra corto REF. GMM250 e/o lungo REF. 001152, se necessario pulire l'interno della fixture.

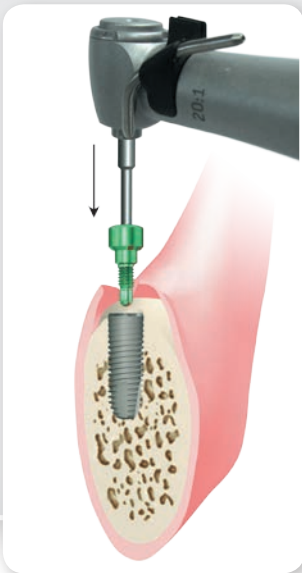Scegliere il condizionatore gengivale della forma e della dimensione più consona al caso (vedi tabella a pag. 24) e portarlo in cavo orale manualmente servendosi dei giraviti extra corto REF. GMM250 e/o lungo REF. 001152.



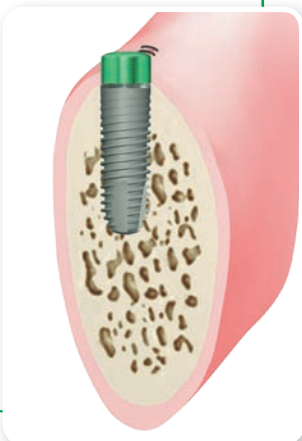È possibile effettuare tale manovra anche servendosi del contrangolo e dei raccordi REF. GCG0024 o REF. GCG0030.



Concludere l'avvitamento dei condizionatori gengivali servendosi dei giraviti sopra citati o della chiave dinamometrica REF. CRDN001 con gli adattatori, corto TW0001C e/o lungo TW0001L

Se è stato inciso un lembo, suturare lo stesso intorno al condizionatore gengivale ed attendere la guarigione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMPLASSIC FT2

Macro Design Esterno

Bisello coronale lucido e collo implantare disegnato per gestire al meglio l'ampiezza biologica e mantenere il livello osseo nel tempo

Geometria delle spire che favorisce la guarigione ossea qualitativamente e quantitativamente

Quattro ampie zone di taglio per una maggior capacità di penetrazione e per raccogliere i frustoli ossei riducendo così la compressione

Apice atraumatico

Andamento progressivo della spira con riduzione della profondità a livello del collo, consente di non realizzare la svasatura del collo in caso di osso non particolarmente compatto e contribuisce al mantenimento del livello osseo nel tempo

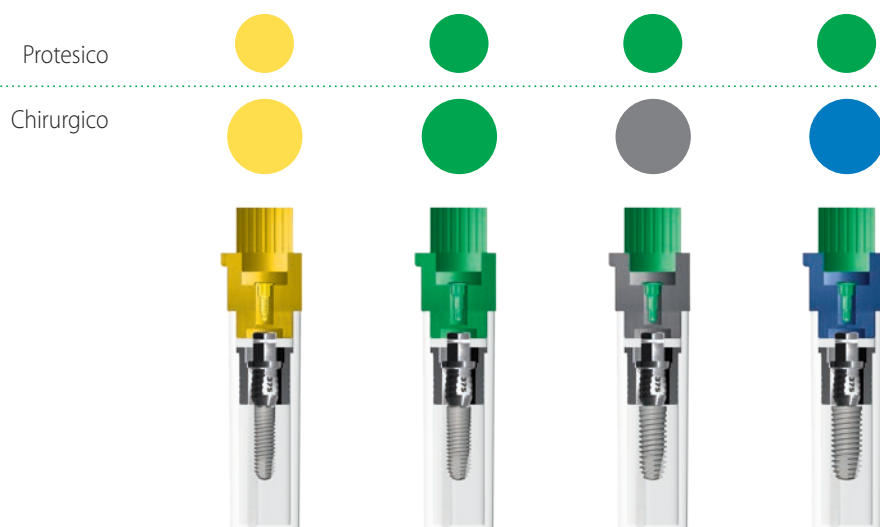
Spira autoflettante a doppio principio per un miglior contatto con l'osso e per una migliore stabilità primaria

Porzione apicale rastremata per consentire la centratura del dispositivo nel sito chirurgico anche in caso di sottopreparazione per motivi di scarsa densità ossea o per ottenere maggior stabilità primaria



Codice colore e diametri

Smart Primary Packaging (S)



Standard Primary Packaging (SP)




ImpLassic FT2 System

Impianto



| | | | | |
|------------------|------|------|------|------|
| Diametro (Ø) mm | 3.25 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
| Lunghezza (L) mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | 16 | 16 | 16 | 16 |

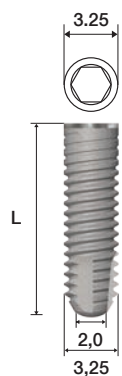MISURE, CODICI E CODICE COLORE CHIRURGICO DEGLI IMPIANTI



Vite di copertura inclusa
nella confezione *

Ti₅

Codice colore
chirurgico



Diametro (Ø) mm

Lunghezza (L) mm

REF


| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | |
| | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | |
| | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 16 | |
| | FTC3208/S | FTC3210/S | FTC3211/S | FTC3213/S | FTC3216/S | |
| | FTC3208/SP | FTC3210/SP | FTC3211/SP | FTC3213/SP | | |



Codice colore
protesico

**Vite di
copertura**

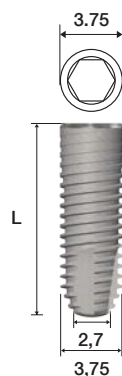VTP 032
*



Vite di copertura inclusa
nella confezione *

Ti₅

Codice colore
chirurgico



Diametro (Ø) mm

Lunghezza (L) mm

REF


| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | |
| | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 16 | |
| | FTC3708/S | FTC3710/S | FTC3711/S | FTC3713/S | FTC3716/S | |
| | FTC3708/SP | FTC3710/SP | FTC3711/SP | FTC3713/SP | | |



Codice colore
protesico

**Vite di
copertura**

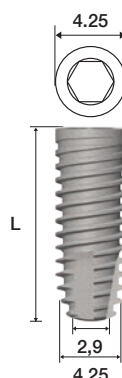003300
*



Vite di copertura inclusa
nella confezione *

Ti₅

Codice colore
chirurgico



Diametro (Ø) mm

Lunghezza (L) mm

REF


| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | |
| | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | |
| | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 16 | |
| | FTC4208/S | FTC4210/S | FTC4211/S | FTC4213/S | FTC4216/S | |
| | FTC4208/SP | FTC4210/SP | FTC4211/SP | FTC4213/SP | | |



Codice colore
protesico

**Vite di
copertura**

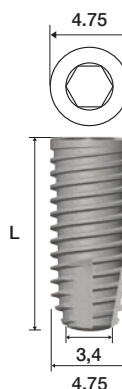003300
*



Vite di copertura inclusa
nella confezione *

Ti₅

Codice colore
chirurgico



Diametro (Ø) mm

Lunghezza (L) mm

REF

| | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | | | | |
| | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |
| | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | |
| | FTC4708/S | FTC4710/S | FTC4711/S | FTC4713/S | FTC4716/S | |
| | FTC4708/SP | FTC4710/SP | FTC4711/SP | FTC4713/SP | | |



Codice colore
protesico

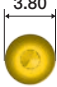


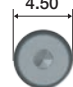
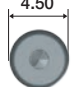










**Vite di
copertura**

003300
*

MISURE, CODICI E CODICE COLORE PROTESICO DEI CONDIZIONATORI GENGIVALI

Condizionatori gingivali svasati

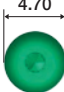
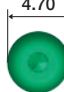
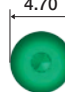
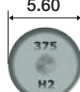

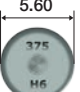












Codice colore
Diametro (Ø) mm
Altezza (h) mm
REF

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 |
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 |
| VG3252 | VG3254 | VG3256 | VG3252L | VG3254L |

Ti₅

Condizionatori gingivali svasati










Codice colore
Diametro (Ø) mm
Altezza (h) mm
REF

| | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| VGR2045 | VGR4045 | VGR6045 | VGR2045L | VGR4045L | VGR6045L |

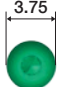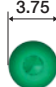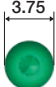Ti₅

Condizionatori gingivali cilindrici

Codice colore
Diametro (Ø) mm
Altezza (h) mm
REF

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| VGC3720 | VGC3740 | VGC3760 |

Ti₅

Ø 3.25 - Ø 3.75



3.25

PANORAMICA PRODOTTO

Impianti



FTC3208
FTC3210
FTC3211
FTC3213
FTC3216

Condizionatori gengivali



Svasato

h 2.0 VG3252
h 4.0 VG3254
h 6.0 VG3256



Svasato large

h 2.0 VG3252L
h 4.0 VG3254L

Componenti per impronta e modelli

Transfer di precisione



Svasato
TPR3200



Svasato large
TPR3200L

Analoghi da laboratorio



AGL3212

Omologhi pilastro



PLD3215
PLD3230



PLI3211
PLI3213
PLI3221
PLI3223

Componenti per protesi cementata

Pilastro dritto provvisorio in peek



Normale

h 3.0 MKS3230



Large

h 3.0 MKS3230L

Pilastro dritto in titanio



Normale

h 1.5 MAS3215
h 3.0 MAS3230



Large

h 1.5 MAS3215L
h 3.0 MAS3230L

Pilastro angolato in titanio



Normale

h 1.5 MPG3211 - 15°
h 1.5 MPG3221 - 25°
h 3.0 MPG3213 - 15°
h 3.0 MPG3223 - 25°



Large

h 1.5 MPG3211L - 15°
h 1.5 MPG3221L - 25°
h 3.0 MPG3213L - 15°
h 3.0 MPG3223L - 25°

Componenti per protesi avvitata a livello impianto

Pilastro provvisorio in peek



EX

h 3.0 PKE325



Non EX

h 3.0 PKR032

Pilastro provvisorio in titanio



EX

PPE325



Non EX

PPR032

Pilastro d'oro sovrappondibile



EX

PSAU325



Non EX

PSAUR32

Componenti per protesi avvitata su pilastro

Pilastro EM



**Pilastro con vite e
cuffia di
protezione**

h 1.0 BTA3210
h 2.5 BTA3225



**Cilindro
calcinabile**
CBR3200



**Transfer
da impronta**
TBT3200



**Analogo
pilastro**
ABT3200

Componenti Overdenture su attacchi singoli

Attacchi a sfera



Pilastro

h 0.5 ASF3200
h 1.5 ASF3215
h 3.0 ASF3230



Cuffia/O- Ring
POR225



**Analogo attacco
a sfera**
AAF225



**Contentore
di metallo**
041CANB



Ritettore
040CRNDR8
1100 gr



Ritettore
040CRNSNDR8
850 gr



Ritettore
049PCNDR8
500 gr

Pilastro d'oro sovrafondibile



EX
PSAU325



Contenitore
di metallo
1930931



Ritentore
3643731
800 gr



Ritentore
3653731
1000 gr



Ritentore
3663731
1200 gr

Microtecnor®

3.75

PANORAMICA PRODOTTO

Impianti



FTC3708
FTC3710
FTC3711
FTC3713
FTC3716



FTC4208
FTC4210
FTC4211
FTC4213
FTC4216



FTC4708
FTC4710
FTC4711
FTC4713
FTC4716

Condizionatori gengivali



Svasato

h 2.0 VGR2045
h 4.0 VGR4045
h 6.0 VGR6045



Svasato large

h 2.0 VGR2045L
h 4.0 VGR4045L
h 6.0 VGR6045L

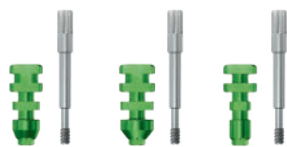


Cilindrico

h 2.0 VGC3720
h 4.0 VGC3740
h 6.0 VGC3760

Componenti per impronta e modelli

Transfer di precisione



Svasato
003379

Svasato large
003379L

Cilindrico
TRC3700

Transfer a strappo



Svasato
003377

Cilindrico
TCS0037

Analoghi da laboratorio



003375

Componenti per protesi cementata

Pilastro dritto provvisorio in peek



Normale

h 3.0 MKS3730



Large

h 3.0 MKS3730L

Pilastro dritto in titanio



Senza spalla
MAD3700



Normale

h 1.5 MAS3715
h 3.0 MAS3730



Large

h 1.5 MAS3715L
h 3.0 MAS3730L

Componenti per protesi avvitata a livello impianto

Pilastro provvisorio in peek



EX

h 3.0 PKE375



Non EX

h 3.0 PKR037

Pilastro provvisorio in titanio



EX

PPE375



Non EX

PPR037

Pilastro d'oro sovrafondibile



EX

PSAU375



Non EX

PSAUR37

Pilastro



EX

003324

Componenti per protesi avvitata su pilastro

Pilastro EM



Pilastro preangolato

h 1.0 PPM171 - 17°
h 3.0 PPM173 - 17°
h 1.0 PPM301 - 30°
h 3.0 PPM303 - 30°



Pilastro dritto

h 1.0 PDM3710
h 3.0 PDM3730



Omologhi pilastro preangolato

OPEM1710
OPEM1730
OPEM3010
OPEM3030



Cuffia di protezione

CPEM



Cilindro in titanio

CTEM



Cilindro calcinabile

CCEM

Componenti Overdenture su attacchi singoli

Pilastro Locator™ (Zest Anchors)



Abutment

h 1.0 8053
h 2.0 8054
h 3.0 8055
h 4.0 8056



Impression coping

8505



4 mm Female analog

8530



Processing Pack

8519-2



Cap Male

8510-V



Blue cap

8529
680 gr
0° - 10°



Pink cap

8527
1360 gr
0° - 10°



Clear cap

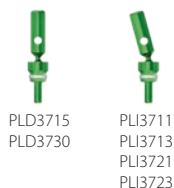
8524
2268 gr
0° - 10°



Red cap

8548
453 gr
10° - 20°

Omologhi pilastro



PLD3715
PLD3730

PLI3711
PLI3713
PLI3721
PLI3723

Pilastro angolato in titanio



Normale

Large

h 1.5 MPG3711 - 15°
h 1.5 MPG3721 - 25°
h 3.0 MPG3713 - 15°
h 3.0 MPG3723 - 25°

h 1.5 MPG3711L - 15°
h 1.5 MPG3721L - 25°
h 3.0 MPG3713L - 15°
h 3.0 MPG3723L - 25°

Pilastro d'oro sovralfondibile



EX

PSAU375

Pilastro fresabile in titanio



MFR3765

Pilastro calcinabile



EX

003324

Pilastro avvitato in titanio



003350

Pilastro calcinabile cementato



003320

calcinabile

Base di titanio



Non EX
PCR037



h 1.0 003335
h 2.5 003336



Vite protesica lunga
VPLEM



Vite protesica corta
VPCEM

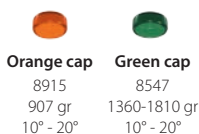


Analogo pilastro
APEM




Transer di precisione
TPPEM

Attacchi a sfera



Orange cap
8915
907 gr
10° - 20°

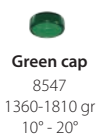

Green cap
8547
1360-1810 gr
10° - 20°



Pilastro
h 0.5 ASF3700
h 1.5 ASF3715
h 3.0 ASF3730
h 5.0 ASF3750



Cuffia/O-Ring
POR225



Contenitore di metallo
041CANB

OT-CAP RHEIN 83°



Ritentore
040CRNDR8
1100 gr



Ritentore
040CRNSNDR8
850 gr



Ritentore
049PCNDR8
500 gr



Contenitore di metallo
1930931

Microtecnor®



Ritentore
3643731
800 gr



Ritentore
3653731
1000 gr



Ritentore
3663731
1200 gr



Analogo attacco a sfera
AAF225

3.25

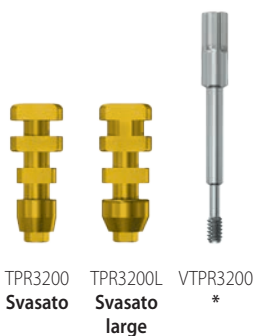
COMPONENTI PER IMPRONTA E MODELLI

Transfer di precisione

Vite di fissaggio inclusa nella confezione *

Ti₅


REF



Analogo da laboratorio

Ti₅

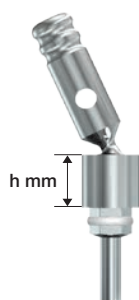REF




Omologhi pilastro

Ti₅

Altezza (h) mm

Angolazione

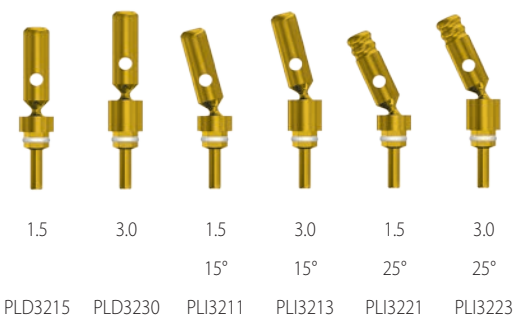REF



1.5

3.0

1.5

3.0

1.5

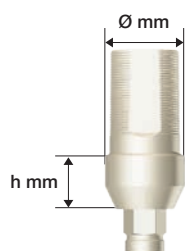
3.0

15°

15°

25°

25°



Pilastro dritto provvisorio

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Peek



| | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| Altezza (h) mm | 3.0 | 3.0 | |
| Diametro (Ø) mm | 3.8 | 4.5 | |
| Marcatura laser | 325 | 325L | |
| REF | MKS3230 Normale | MKS3230L Large | VFD032 * |

Pilastro dritto

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅



| | | | |
|-----------------|---------|---------|-------------|
| Altezza (h) mm | 1.5 | 3.0 | |
| Diametro (Ø) mm | 3.8 | 3.8 | |
| Marcatura laser | 325 | 325 | |
| REF | MAS3215 | MAS3230 | VFD032 * |

Pilastro dritto large

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅



| | | | |
|-----------------|----------|----------|-------------|
| Altezza (h) mm | 1.5 | 3.0 | |
| Diametro (Ø) mm | 4.5 | 4.5 | |
| Marcatura laser | 325L | 325L | |
| REF | MAS3215L | MAS3230L | VFD032 * |

Pilastro angolato

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅



| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Altezza (h) mm | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
| Diametro (Ø) mm | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Marcatura laser | 325/15° | 325/25° | 325/15° | 325/25° | 325L/15° | 325L/25° | 325L/15° | 325L/25° | |
| REF | MPG3211 Normale | MPG3221 Normale | MPG3213 Normale | MPG3223 Normale | MPG3211L Large | MPG3221L Large | MPG3213L Large | MPG3223L Large | VFD032 * |

Cilindro d'oro sovrafondibile EX

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Au


Pom



| | | |
|-----|---------|-------------|
| REF | PSAU325 | VFD032 * |
|-----|---------|-------------|

3.25

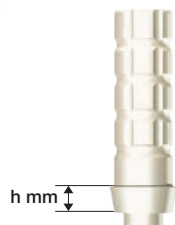COMPONENTI PER PROTESI AVVITATA A LIVELLO IMPIANTO



Pilastro provvisorio

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Peek




Ti₅

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| Altezza (h) mm | 3.0 | 3.0 | |
| Marcatura laser | 325E | 325R | |
| REF | PKE325 EX | PKR032 Non EX | VFD032 * |

Pilastro provvisorio

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| |  |  |  |
| Altezza (h) mm | 3.0 | 3.0 | |
| Marcatura laser | 325E | 325R | |
| REF | PPE325 EX | PPR032 Non EX | VFD032 * |

Cilindro d'oro sovrappondibile


Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Au

Pom

Ti₅

| | | | |
|-----|---|---|---|
| |  |  |  |
| REF | PSAU325 EX | PSAUR32 Non EX | VFD032 * |

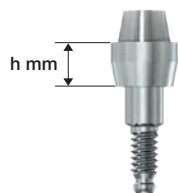

Pilastro E.M. con vite e cuffia di protezione

Inclusi nella confezione *

Ti₅

| | | | | |
|----------------|---------|---------|--------------|---------------|
| | | | | |
| Altezza (h) mm | 1.0 | 2.5 | | |
| REF | BTA3210 | BTA3225 | VB32200 * | GBT32200 * |

Cilindro calcinabile

Vite di fissaggio inclusa nella confezione *

Pom

Ti₅

| | | |
|-----|---------|--------------|
| | | |
| REF | CBR3200 | VB32200 * |

Transfer da impronta

Vite di fissaggio inclusa nella confezione *

Ti₅

| | | |
|-----|---------|-------------|
| | | |
| REF | TBT3200 | VTT032 * |

Analogo pilastro


Ti₅

| | |
|-----|---------|
| | |
| REF | ABT3200 |

3.25

COMPONENTI PER OVERDENTURE

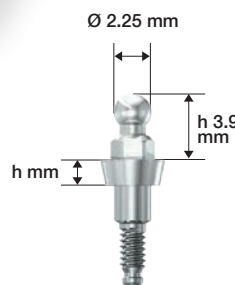Attacchi a sfera




Pilastro

Fornito con manico di trasferimento

Ti5

| | | | |
|----------------|---------|---------|---------|
| | | | |
| Altezza (h) mm | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
| REF | ASF3200 | ASF3215 | ASF3230 |

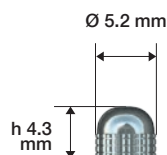

O-Ring

- 2 pz. inclusi nella confezione
- 10 pz. inclusi nella confezione

Ti5

| | | |
|-----|--------|--------|
| | | |
| REF | POR225 | ORG225 |

OT-CAP RHEIN 83®

- Confezione da 2 pz.
- * Confezione da 6 pz.
- Confezione da 10 pz. prodotto da DentalTech

| | | | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| | | | | | |
| Grammi | • | * | * | * | ◆ |
| | | 850 | 500 | 1100 | |
| REF | 041CANB | 040CRNSNDR8 | 049PCNDR8 | 040CRNDR8 | MSR083 |
| | | | | | Mantenitore di spazio |

Metallo
Plastica

Microtecnor®

- Confezione da 2 pz.
- * Confezione da 4 pz.
- Confezione da 10 pz. prodotto da DentalTech

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------|
| | | | | | |
| Grammi | • | * | * | * | ◆ |
| | | 880 | 1000 | 1200 | |
| REF | 1930931 | 3643731 | 3653731 | 3663731 | MSM020 |
| | | | | | Mantenitore di spazio |

Metallo
Plastica

Analogo attacco a sfera

Ti5

| | |
|-----|--------|
| | |
| REF | AAF225 |

TORQUE GUIDE RACCOMANDATO



**Adattatore
per viti fissaggio**
CORTO TW0001C
LUNGO TW0001L

20 Ncm



Pilastro dritto provvisorio in peek
MKS3230



MKS3230L



Cilindro calcinabile
CBR3200



Pilastro angolato in titanio
MPG3211
MPG3213
MPG3221
MPG3223



MPG3211L
MPG3213L
MPG3221L
MPG3223L



Pilastro
BTA3210
BTA3225



PKE325



PKR032



PPE325



PPR032

Pilastro Provv. (Ex e non Ex) in peek / titanio



MAS3215
MAS3230



MAS3215L
MAS3230L



Pilastro d'oro sovralfondibile (Ex e non Ex)
PSAU325



PSAUR32



**Adattatore
per attacco a sfera**
RDS225

20 Ncm



ASF3200
ASF3215
ASF3230



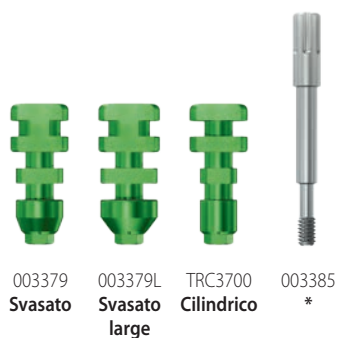
**Cricchetto
Dinamometrico**
HTW2070/K

Transfer di precisione

Vite di fissaggio inclusa nella confezione *

Ti₅

REF



Transfer a strappo

Vite di fissaggio inclusa nella confezione *

Ti₅

REF



Analogo da laboratorio

Ti₅

REF



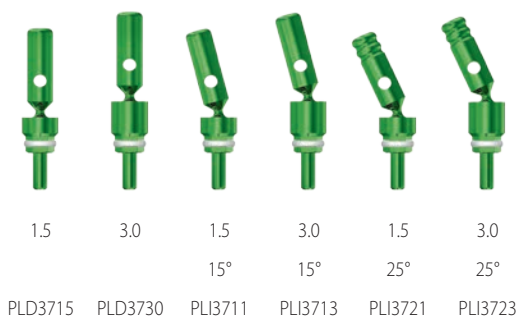
Omologhi pilastro

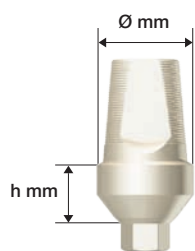
Ti₅

Altezza (h) mm

Angolazione

REF





Pilastro dritto provvisorio

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Peek

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| Altezza (h) mm | 3.0 | 3.0 | |
| Diametro (Ø) mm | 4.5 | 5.5 | |
| Marcatura laser | 375 | 375L | |
| REF | MKS3730 Normale | MKS3730L Large | VFD037 * |

Pilastro dritto

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅

| | | | |
|-----------------|---------|---------|------------------------|
| | | | |
| Altezza (h) mm | | 1.5 | 3.0 |
| Diametro (Ø) mm | 4.5 | 4.5 | |
| Marcatura laser | 375 | 375 | 375 |
| REF | MAD3700 | MAS3715 | MAS3730 VFD037 * |

Pilastro dritto large

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅

| | | | |
|-----------------|----------|----------|-------------|
| | | | |
| Altezza (h) mm | 1.5 | 3.0 | |
| Diametro (Ø) mm | 5.5 | 5.5 | |
| Marcatura laser | 375L | 375L | |
| REF | MAS3715L | MAS3730L | VFD037 * |

Pilastro angolato

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| Altezza (h) mm | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | |
| Diametro (Ø) mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Marcatura laser | 375/15° | 375/25° | 375/15° | 375/25° | 375L/15° | 375L/25° | 375L/15° | 375L/25° | |
| REF | MPG3711 Normale | MPG3721 Normale | MPG3713 Normale | MPG3723 Normale | MPG3711L Large | MPG3721L Large | MPG3713L Large | MPG3723L Large | VFD037 * |

Cilindro d'oro sovrafondibile EX

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Au

Pom

| | | |
|-----|---------|-------------|
| REF | PSAU375 | VFD037 * |
|-----|---------|-------------|

Pilastro fresabile

Vite di fissaggio inclusa
nella confezione e disponibile
come ricambio *

Ti₅

Marcatura laser



375

REF

MFR3765

VFD037

*

**Pilastro calcinabile
EX**

Vite di fissaggio inclusa
nella confezione e disponibile
come ricambio *

Pom

REF



003324

003324/VP

*

Pilastro pieno**Ti₅**

REF



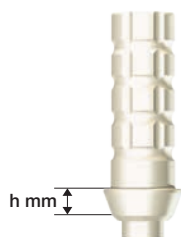
003350

**Pilastro calcinabile
cementato****Pom**

REF



003320



Pilastro provvisorio

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Peek

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| | | | |
| Altezza (h) mm | 1.5 | 1.5 | |
| Marcatura laser | 375E | 375R | |
| REF | PKE375 EX | PKR037 Non EX | VFD037 * |

Pilastro provvisorio

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Ti₅

| | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-------------|
| | | | |
| Altezza (h) mm | 1.5 | 1.5 | |
| Marcatura laser | 375E | 375R | |
| REF | PPE375 EX | PPR037 Non EX | VFD037 * |

Cilindro d'oro sovralfondibile

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Au

Pom

Ti₅

| | | | |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------|
| | | | |
| REF | PSAU375 EX | PSAUR37 Non EX | VFD037 * |

Pilastro calcinabile

Vite di fissaggio inclusa nella confezione e disponibile come ricambio *

Pom

Ti₅

| | | | |
|-----|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | | |
| REF | 003324 EX | PCR037 Non EX | 003324/VP * |

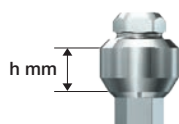
Base di Titanio

Inclusi nella confezione e disponibile come ricambio solo REF 003341 *

Au

Pom

Ti₅



| | | | | |
|-----------------|--------|--------|-------------|----------------|
| | | | | |
| Altezza (h) mm | 1.0 | 2.5 | | |
| Marcatura laser | 3.75 | 3.75 | | |
| REF | 003335 | 003336 | 003341 * | 003335/VP * |

3.75

COMPONENTI PER PROTESI AVVITATA SU PILASTRO




Pilastro dritto

Fornito con manico di trasferimento

Ti₅



| | | |
|--------------------|---------|---------|
| Altezza (h) spalla | 1.0 | 3.0 |
| Diametro (Ø) | 3.75 | 3.75 |
| REF | PDM3710 | PDM3730 |

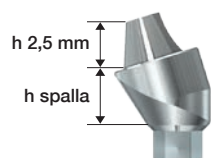

Pilastro preangolato

Fornito con vite di trasporto e parallelizzazione.

Vite di fissaggio inclusa nella confezione *

Ti₅



| | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Altezza (h) spalla | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | |
| Marcatura laser | 17° | 17° | 30° | 30° | |
| Diametro (Ø) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |
| REF | PPM171 | PPM173 | PPM301 | PPM303 | VFPEM * |

Cuffia di protezione

Da utilizzare esclusivamente sui pilastri PDM e PPM
Confezione da 2 pz.

Pom



| | |
|-----|------|
| REF | CPEM |
|-----|------|

Cilindro

Da utilizzare esclusivamente sui pilastri PDM e PPM



| | | |
|-----------------|-----------------------|------------|
| Marcatura laser | EM | |
| REF | CTEM | CCEM |
| | Ti₅ | Pom |


Vite protesica

Da utilizzare esclusivamente sui pilastri PDM e PPM
Confezione da 2 pz.

Ti₅



| | | |
|-----|-------------|-------------|
| REF | VPLEM Lunga | VPCEM Corta |
|-----|-------------|-------------|

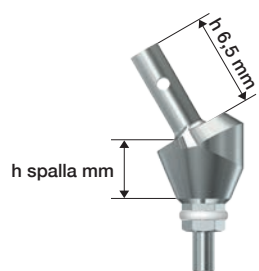

Omologhi pilastro Preangolato (PPM)

Ti₅

| | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | |
| Altezza (h) spalla | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| Marcatura laser | 375/17° | 375/17° | 375/30° | 375/30° |
| Diametro (Ø) | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| REF. | OPEM1710 | OPEM1730 | OPEM3010 | OPEM3030 |

Analogo pilastro (PDM / PPM)

Ti₅

| | |
|-----------------|------|
| | |
| Marcatura laser | EM |
| REF. | APEM |

Transer di precisione (PDM / PPM)

Vite di fissaggio inclusa
nella confezione *


Ti₅

| | | |
|-----------------|------|------------|
| | | |
| Marcatura laser | EM | |
| REF. | TPEM | VFTEM * |

3.75

COMPONENTI PER OVERDENTURE

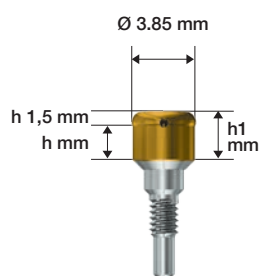Pilastro Locator™ (Zest Anchors LLC)



Pilastro Locator™

Ti₅ TiN-coating

Altezza (h) mm

REF



1.0

2.0

3.0

4.0

8053

8054

8055

8056

Transfer Locator™ Abutments Pick-up

REF



8505

Ti₅

Analogo Locator™ Abutments Replica

REF



8530
Analogo

Ti₅

Locator™ Processing Pack

REF 8519-2

Confezione da 2 pz.



Locator™ Replacement Denture Cap Male

REF 8510-V

Confezione da 4 pz.



Locator™ Inserts

Confezione da 4 pz.

Grammi



680

1360

2268

453

907

1360-1810

0° - 10°

0° - 10°

0° - 10°

10° - 20°

10° - 20°

10° - 20°

REF

8529

8527

8524

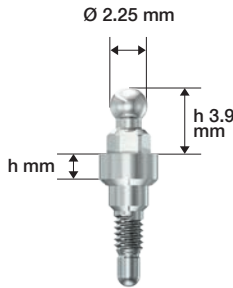
8548

8915

8547

Plastica

Attacchi a sfera




Pilastro

Fornito con manico di trasferimento

Ti5

| | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| Altezza (h) mm | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 5.0 |
| REF | ASF3700 | ASF3715 | ASF3730 | ASF3750 |

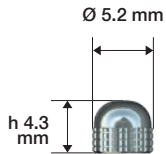

O-Ring

- 2 pz. inclusi nella confezione
- 10 pz. inclusi nella confezione

Ti5

| | | |
|-----|--------|--------|
| | | |
| REF | POR225 | ORG225 |

OT-CAP RHEIN 83®

- Confezione da 2 pz.
- * Confezione da 6 pz.
- ♦ Confezione da 10 pz. prodotto da DentalTech

Metallo
Plastica

| | | | | | |
|--------|---------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | |
| Grammi | • | * | * | * | ♦ |
| REF | 041CANB | 040CRNSNDR8 | 049PCNDR8 | 040CRNDR8 | MSR083 Mantenitore di spazio |

Microtecnor®

- Confezione da 2 pz.
- * Confezione da 4 pz.
- ♦ Confezione da 10 pz. prodotto da DentalTech

Metallo
Plastica

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| | | | | | |
| Grammi | • | * | * | * | ♦ |
| REF | 1930931 | 3643731 | 3653731 | 3663731 | MSM020 Mantenitore di spazio |

Analogo attacco a sfera

Ti5

| | |
|-----|--------|
| | |
| REF | AAF225 |

TORQUE GUIDE RACCOMANDATO



**Adattatore
per viti fissaggio**
CORTO TW0001C
LUNGO TW0001L

20 Ncm



Pilastro dritto provvisorio in peek
MKS3730 MKS3730L



Pilastro dritto con e senza spalla in titanio
MAD3700 MAS3715 MAS3730 MAS3715L MAS3730L



**Pilastro fresabile
in titanio**
MFR3765



Pilastro angolato in titanio
MPG3711 MPG3713 MPG3721 MPG3723 MPG3711L MPG3713L MPG3721L MPG3723L



Pilastro d'oro sovralfondibile (Ex e non Ex)
PSAU375 PSAUR37



Pilastro preangolato EM
PPM171 PPM173 PPM301 PPM303



Pilastro calcinabile (Ex e non Ex)
003324 PCR037



Pilastro Prov. (Ex e non Ex) in peek / titanio
PKE375 PKR037 PPE375 PPR037



Base di titanio
003335 003336



**Adattatore
per attacco a sfera**
RDS225

20 Ncm



ASF3700
ASF3715
ASF3730
ASF3750



**Adattatore
per pilastro pieno**
CORTO TW0015C
LUNGO TW0015L

20 Ncm



**Pilastro pieno
in titanio**
003350



**Adattatore pilastro
EM**
TW0080

20 Ncm

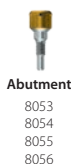


Pilastro dritto
PDM3710
PDM3730
*




**Adattatore
Pilastro Locator**
ADL150

20 Ncm



Abutment
8053
8054
8055
8056

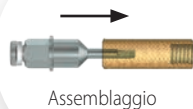


Assemblaggio



**Adattatore
per viti fissaggio**
CORTO TW0001C
LUNGO TW0001L

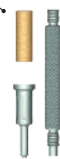20 Ncm



**Strumento
universale**
8393



Abutment
8053
8054
8055
8056



**Adattatore
per viti fissaggio**
CORTO TW0001C
LUNGO TW0001L

10 Ncm



**Cilindro
in titanio**
CTEM



**Cilindro
calcinabile**
CCEM



**Vite protesica
lunga**
VPLEM



**Vite protesica
corta**
VPCEM



**Cricchetto
Dinamometrico**
HTW2070/K

* PER IL SERRAGGIO RIMUOVERE LA VITE DALL'ADATTATORE



Cricchetto

inox

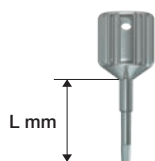
Dinamometrico

REF HTW2070/K (20-70 Ncm)



Giravite esagonale

inox



Micro

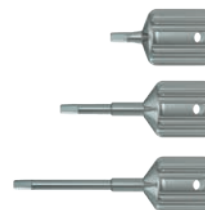
REF GMX100 Lunghezza (L) 4.5 mm

Extra corto

REF GMM250 Lunghezza (L) 11.5 mm


Lungo

REF 001152 Lunghezza (L) 13.5 mm



Giravite esagonale per contrangolo

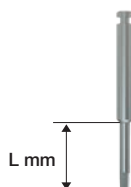inox



Corto

REF GCG0024 Lunghezza (L) 8.3 mm

Lungo

REF GCG0030 Lunghezza (L) 14.3 mm



Adattatori per cricchetto dinamometrico

inox

Pilastro pieno - Corto

REF TW0015C Lunghezza (L) 13 mm

Pilastro pieno - Lungo

REF TW0015L Lunghezza (L) 19 mm

Viti di fissaggio pilastri - Corto

REF TW0001C Lunghezza (L) 12.5 mm

Viti di fissaggio pilastri - Lungo

REF TW0001L Lunghezza (L) 18.5 mm

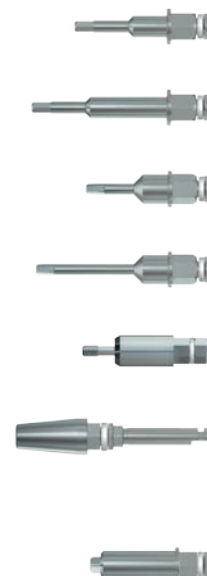
Pilastro E.M.

REF TW0080 Lunghezza (L) 9.5 mm

Attacco a sfera

REF RDS225 Lunghezza (L) 10 mm

Utilizzare in accoppiamento con:
AST050 - AST150



Ti5

Pilastro Locator

REF ADL150 Lunghezza (L) 12 mm

Angle measurement guide

REF 9530



Adattatori Locator®


inox

Raccordo per contrangolo

REF 8914

Strumento universale

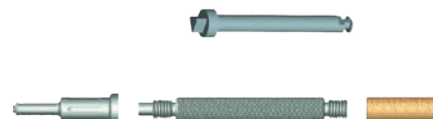REF 8393



Bibliografia

- **Surface Chemistry Effects of topographic Modification of Titanium Dental Implant Surfaces:**
1. Surface Analysis
M. Morra, dr. chem / C. Cassinelli, dr. Biol / G. Bruzzone, MD
A. Capri, MD / G. Di Santi, MD / R. Giardino, MD / M. Fini, MD.
Int. JOMI 2003; 18:40-45
- **Surface Chemistry Effects of topographic Modification of Titanium Dental Implant Surfaces:**
2. In Vitro Experiments
M. Morra, dr. chem / C. Cassinelli, dr. Biol / G. Bruzzone, MD
A. Capri, MD / G. Di Santi, MD / R. Giardino, MD / M. Fini, MD.
Int. JOMI 2003; 18:46-52
- **Valutazione della precisione della connessione tra moncone ed impianto**
Benedicenti S.* / Balboni C.** / Maspero F. * / Benedicenti A.*
Quintessence International 3/4 bis 2001
- **Adesione cellulare epiteliale su superfici di titanio sabbiate e acidificate: studio in vitro**
I. Vozza / A. Scarano* / S. Rossi / M. Quaranta
Supplemento n.1 a Doctor OS anno XIV n.1 gennaio 2003
- **Valutazione istologica della risposta ossea a una nuova superficie implantare sabbata e mordenzata: uno studio sperimentale sul coniglio**
Antonio Scarano / Giovanna Iezzi* / Alessandro Quaranta**
Adriano Piattelli*
Implantologia orale numero 2 marzo 2007
- **Dentista moderno ottobre 2011**
Progettazione e realizzazione di una superficie implantare dalla decontaminazione all'osteointegrazione
Chiara Giamberini / Angelo Tagliabue / Dino Azzalin
Giorgio Santarelli
- **Int J Periodontics Restorative Dent. 2006 Feb; 26(1): 9-17**
Platform switching: a new concept in implant dentistry for controlling postrestorative crestal bone levels.
Lazzara RJ / Porter SS.
- **IVela-Nebot X, et al.**
Benefits of an implant platform modification technique to reduce crestal bone resorption.
Implant Dent 2006;15:313-320

Condizioni di vendita


- Con il conferimento di un ordine da parte del Cliente, le presenti Condizioni di Vendita si intendono accettate.
- In qualsiasi momento e senza preavviso La Società si riserva il diritto di modifica del Listino Prezzi.
- La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se consegnata franco destino.
- I termini di consegna hanno valore indicativo. La Società si riserva la facoltà di effettuare anche consegne parziali.
- I pagamenti devono avvenire secondo le modalità ed entro i termini convenuti. In caso di inadempienza la Società si riserva il diritto di variare le condizioni di pagamento per le nuove forniture o di sospenderle e di ricorrere a ogni altra misura cautelativa ed esecutiva per un totale recupero dei propri crediti.
- Ogni reclamo per difetti o danneggiamenti dovrà essere comunicato per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Società.
- Per tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Vendita si applicano le disposizioni di legge italiana. Per eventuali controversie è competente il foro di Milano.

Indice per codice di riferimento



| REF | | pagina | |
|--------------|--|--------|----|
| 001140 | Sonda di profondità | 21 | |
| 001152 | Giravite esagonale - Lungo | 21-67 | |
| 001162 | Chiave manuale Lunga | 21 | |
| 003320 | Pilastro calcinabile cementato | 60 | ● |
| 003324 | Pilastro calcinabile - EX | 60-61 | ● |
| 003324/VP | Vite di Fissaggio Pilastro Calcinabile | 60-61 | ● |
| 003335 | Base Titanio - h 1.0 | 61 | ● |
| 003336 | Base Titanio - h 2.5 | 61 | ● |
| 003341 | Cilindro calcinabile | 61 | ● |
| 003350 | Pilastro avvitato | 60 | ● |
| 003375 | Analogo da laboratorio | 58 | ● |
| 003377 | Transfer a strappo - Svasato | 58 | ● |
| 003379 | Transfer di precisione - Svasato | 58 | ● |
| 003379L | Transfer di precisione - Svasato Large | 58 | ● |
| 040CRNDR8 | OT-CAP RHEIN 83° - Verde | 56-65 | ●● |
| 040CRNSNDR8 | OT-CAP RHEIN 83° - Rosa | 56-65 | ●● |
| 041CAN | OT-CAP RHEIN 83° - Box | 56-65 | ●● |
| 049PCNDR8 | OT-CAP RHEIN 83° - Arancio | 56-65 | ●● |
| 110026 | Prolunga | 21 | |
| 1930931 | Microtecnor® - Box | 56-65 | ●● |
| 2011.02 CAXL | Fresa lancia L 38 | 17 | |
| 2011.023 CAL | Fresa lancia L 28 | 17 | |
| 3643731 | Microtecnor® - Bianco | 56-65 | ●● |
| 3653731 | Microtecnor® - Verde | 56-65 | ●● |
| 3663731 | Microtecnor® - Blu | 56-65 | ●● |
| 8053 | Pilastro Locator™ - h 1.0 | 64 | ● |
| 8054 | Pilastro Locator™ - h 2.0 | 64 | ● |
| 8055 | Pilastro Locator™ - h 3.0 | 64 | ● |
| 8056 | Pilastro Locator™ - h 4.0 | 64 | ● |
| 8393 | Adattatori Locator® - Strumento universale | 67 | ● |
| 8505 | Transfer Locator™ Abutments Pick-up | 64 | ● |
| 8510-V | Locator™ Replacement Denture Cap Male | 64 | ● |
| 8519-2 | Locator™ Process Kit | 64 | ● |
| 8524 | Locator™ Inserts - Bianco | 64 | ● |
| 8524 | Locator™ Inserts - Bianco | 64 | ● |
| 8527 | Locator™ Inserts - Rosa | 64 | ● |
| 8527 | Locator™ Inserts - Rosa | 64 | ● |
| 8529 | Locator™ Inserts - Blu | 64 | ● |
| 8529 | Locator™ Inserts - Blu | 64 | ● |
| 8530 | Analogo Locator™ Abutments Replica | 64 | ● |
| 8547 | Locator™ Inserts - Verde | 64 | ● |
| 8548 | Locator™ Inserts - Rosso | 64 | ● |
| 8914 | Adattatore Raccordo per contrangolo | 67 | |
| 8915 | Locator™ Inserts - Arancio | 64 | ● |
| 9530 | Angle measurement guide | 67 | |
| AAF225 | Analogo attacco a sfera | 56-65 | ●● |
| ABT3200 | Analogo pilastro | 55 | ● |
| ADL150 | Adattatore Pilastro Locator | 67 | |
| AGL3212 | Analoghi da laboratorio | 52 | ● |
| AMC016 | Chiave manuale Corta | 21 | |
| APEM | Analogo pilastro (PDM / PPM) | 63 | ● |
| ASF3200 | Attacco a sfera - h 0.5 | 56 | ● |
| ASF3215 | Attacco a sfera - h 1.5 | 56 | ● |
| ASF3230 | Attacco a sfera - h 3.0 | 56 | ● |
| ASF3700 | Attacco a sfera - h 0.5 | 65 | ● |

| REF | | pagina | |
|------------|--|--------|---|
| ASF3715 | Attacco a sfera - h 1.5 | 65 | ● |
| ASF3730 | Attacco a sfera - h 3.0 | 65 | ● |
| ASF3750 | Attacco a sfera - h 5.0 | 65 | ● |
| AVC032 | Avvitatore diretto da contrangolo | 21 | |
| AVC037 | Avvitatore diretto da contrangolo | 21 | |
| AVD325 | Avvitatore diretto manuale | 21 | |
| AVD375 | Avvitatore diretto manuale | 21 | |
| BTA3210 | Pilastro con vite e cuffia di protezione - h 1.0 | 55 | ● |
| BTA3225 | Pilastro con vite e cuffia di protezione - h 2.5 | 55 | ● |
| CBR3200 | Cilindro calcinabile | 55 | ● |
| CCEM | Cilindro calcinabile | 62 | ● |
| CFM001 | Chiave forcella | 21 | |
| CMC037 | Avvitatore da contrangolo Corto | 21 | |
| CML037 | Avvitatore da contrangolo Lungo | 21 | |
| CMX370 | Avvitatore da contrangolo Extra corto | 21 | |
| CPEM | Cuffia di protezione | 62 | ● |
| CPT3747 | Parallel pin | 21 | |
| CTEM | Cilindro titanio | 62 | ● |
| CTK325 | Countersink Ø3.25 | 17 | |
| CTK375 | Countersink Ø3.75 | 17 | |
| CTK425 | Countersink Ø4.25 | 17 | |
| CTK475 | Countersink Ø4.75 | 17 | |
| CTT600 | Cricchetto Fisso | 21 | |
| DEX235 | Prolunga per fresa | 21 | |
| DRP200 | Fresa iniziale cilindrica Ø2 | 17 | |
| DRP280 | Fresa cilindrica Ø2.8 | 17 | |
| DRP310 | Fresa cilindrica Ø3.1 | 17 | |
| DRP325 | Fresa cilindrica Ø3.25 | 17 | |
| DRP360 | Fresa cilindrica Ø3.6 | 17 | |
| DRP375 | Fresa cilindrica Ø3.75 | 17 | |
| DRP410 | Fresa cilindrica Ø4.1 | 17 | |
| DRP425 | Fresa cilindrica Ø4.25 | 17 | |
| DRP2200 | Fresa iniziale cilindrica zirconio Ø2 | 17 | |
| FTC3208/S | Impianto Ø3.25 L 8 | 44 | ● |
| FTC3208/SP | Impianto Ø3.25 L 8 | 44 | ● |
| FTC3210/S | Impianto Ø3.25 L 10 | 44 | ● |
| FTC3210/SP | Impianto Ø3.25 L 10 | 44 | ● |
| FTC3211/S | Impianto Ø3.25 L 11.5 | 44 | ● |
| FTC3211/SP | Impianto Ø3.25 L 11.5 | 44 | ● |
| FTC3213/S | Impianto Ø3.25 L 13 | 44 | ● |
| FTC3213/SP | Impianto Ø3.25 L 13 | 44 | ● |
| FTC3216/S | Impianto Ø3.25 L 16 | 44 | ● |
| FTC3216/SP | Impianto Ø3.25 L 16 | 44 | ● |
| FTC3708/S | Impianto Ø3.75 L 8 | 44 | ● |
| FTC3708/SP | Impianto Ø3.75 L 8 | 44 | ● |
| FTC3710/S | Impianto Ø3.75 L 10 | 44 | ● |
| FTC3710/SP | Impianto Ø3.75 L 10 | 44 | ● |
| FTC3711/S | Impianto Ø3.75 L 11.5 | 44 | ● |
| FTC3711/SP | Impianto Ø3.75 L 11.5 | 44 | ● |
| FTC3713/S | Impianto Ø3.75 L 13 | 44 | ● |
| FTC3713/SP | Impianto Ø3.75 L 13 | 44 | ● |
| FTC3716/S | Impianto Ø3.75 L 16 | 44 | ● |
| FTC3716/SP | Impianto Ø3.75 L 16 | 44 | ● |
| FTC4208/S | Impianto Ø4.25 L 8 | 44 | ● |
| FTC4208/SP | Impianto Ø4.25 L 8 | 44 | ● |

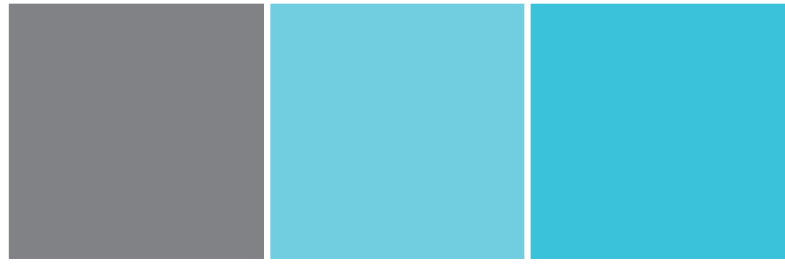

www.dental-tech.it

